



Schnelllieferprogramm

XPRESS



WALDNER

1 Abzüge und Absaugungen

Tischabzug.....	4
Niedrigraum-Tischabzug.....	5
Begehbarer Abzug mit Seiteninstallation.....	6
AKKURAT.....	7
Secuflow EN7 Abzug für hohe thermische Lasten.....	8
MobilAir.....	10
Unterbauabsaugung.....	13
Absaugarm.....	14
Absaugesse.....	15

2 Medienträger

Medienkanal.....	16
Mediensäule.....	17
Medienzelle.....	22
Medienampel.....	24
Medienstation.....	26
Medienwandkanal.....	27
Medientischaufsatz.....	28

3 Labortische und Spülen

Tisch mit H-Fuß-Tischgestell.....	32
Tisch mit C-Fuß-Tischgestell.....	33
Rolltisch.....	34
Höhenverstellbarer Tisch.....	35
Material der Arbeitsplatten.....	36
Laborspüle.....	40
Stirnspüle.....	41
Beckenmodul an Medienzelle.....	42
Wägetisch.....	43

4 Stauräume

Unterbau auf Sockel.....	44
Unterbau auf Rollen.....	46
Eingehängter Unterbau.....	48
Eingeschobener Unterbau für Abzüge.....	50
Unterbau für Spülen.....	52

4 Stauräume

Hängeschränk.....	55
Laborschränk.....	57
Soforthilfeschränk.....	61
Aufsatzschränk.....	62
Auszugsschränk.....	63
Laborschränk zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen.....	65
Sicherheitsunterbau zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen.....	67
FWF 90-Sicherheitsunterbau für Abzüge zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten.....	69
FWF 90-Sicherheitsschränk zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten.....	71
G 90-Sicherheitsschränk für Druckgasflaschen.....	73

5 Medien

Sanitärinstallation.....	76
Elektroinstallation.....	77

6 Zubehör

Laborzubehör XPRESS.....	78
--------------------------	----

7 Allgemeines


Auszeichnungen.....	98
Installationsschnittpunkte Sanitär und Elektro.....	100

XPRESS Tischabzug

Verwendungszweck

- Schutzeinrichtung für den Anwender, geprüft nach EN 14175
- Absaugung von Dämpfen, Aerosolen und Stäuben aus dem Abzugsinnenraum, sodass keine gefährlichen Schadstoffkonzentrationen in den Laborraum gelangen
- Verringerung des Risikos der Bildung einer hohen Gefahrstoffkonzentration / gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre im Abzugsinnenraum
- Schutz vor verspritzenden, gefährlichen Stoffen
- Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Körpern oder Teilen aus dem Abzugsinnenraum
- Nach EN 14175 gebaute Allgebrauchsabzüge sind in der Regel für Arbeiten mit radioaktiven Substanzen und Arbeiten mit Mikroorganismen nicht geeignet
- Nicht geeignet für offene Aufschlussarbeiten
- Entnahmestellen in der Rückwand des Abzugsinnenraums
- Bedienelemente außenliegend an der Traverse

Maßzeichnung

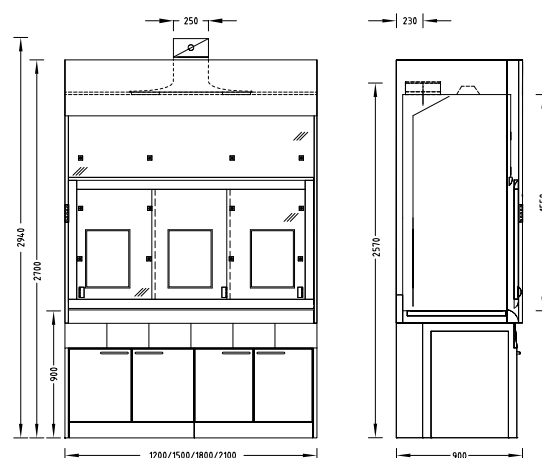

Technische Daten

Abmessungen	1200	1500	1800
Breite [mm]	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	900		
Höhe [mm]	2700		
Nutzbreite Innenraum [mm]	1150	1450	1750
Nutzhöhe Innenraum [mm]	1550		
Arbeitshöhe [mm]	900		
Gewicht	1200	1500	1800
Ohne Installation [kg]	Ca. 250	Ca. 300	Ca. 350
Varianten			
Secuflow	optional		
Ablufthaube ø	250 mm und 315 mm		
Schiebefenster-Controller	optional		
Innenauskleidung	Melaminharz-Beschichtung oder Vollkern Steinzeug (10 Wochen)		
Abzugsseitenwand	Glaspanel und / oder Kabelschleuse		
Arbeitsplatte	Steinzeug; Trichterbecken nur in Rückwand möglich		
Medienzuführung	Elektroversorgung: Die Länderspezifikation entnehmen Sie bitte der Kategorie 5 (Medien) Sanitärversorgung: Bis zu 3 verschiedene Medien. Auch mehrere Anschlüsse möglich, je nach schon vorhandener Bestückung. Siehe Kategorie 5 (Medien) Medienversorgung standardmäßig von oben, falls nicht anders angegeben. Bitte geben Sie immer die Anschlusspunkte auf den technischen Zeichnungen an.		
Beleuchtung	Downlight		
Verglasung	ESG und VSG		
Luftstromüberwachung	FAZ / AC4 ohne Busanbindung		
Material	B2 Standard		

! Kein Becken in der Tischplatte möglich!


XPRESS

Niedrigraum-Tischabzug

Verwendungszweck

- Schutzeinrichtung für den Anwender, geprüft nach EN 14175
- Absaugung von Dämpfen, Aerosolen und Stäuben aus dem Abzugsinnenraum, sodass keine gefährlichen Schadstoffkonzentrationen in den Laborraum gelangen
- Verringerung des Risikos der Bildung einer hohen Gefahrstoffkonzentration / gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre im Abzugsinnenraum
- Schutz vor verspritzenden, gefährlichen Stoffen
- Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Körpern oder Teilen aus dem Abzugsinnenraum
- Nach EN 14175 gebaute Allgebrauchsabzüge sind in der Regel für Arbeiten mit radioaktiven Substanzen und Arbeiten mit Mikroorganismen nicht geeignet
- Nicht geeignet für offene Aufschlussarbeiten
- Entnahmestellen in der Rückwand des Abzugsinnenraums
- Bedienelemente außenliegend an der Traverse
- Geeignet für Räume mit geringer Raumhöhe

Maßzeichnung

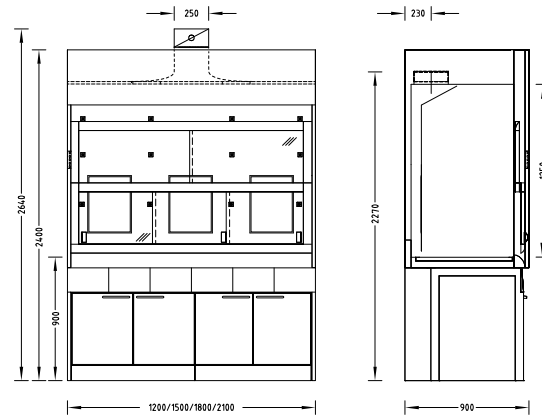

Technische Daten

Abmessungen	1200	1500	1800
Breite [mm]	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	900		
Höhe [mm]	2400 + 285 mm bei Frontschieberöffnung 900 mm		
Nutzbreite Innenraum [mm]	1150	1450	1750
Nutzhöhe Innenraum [mm]	1250		
Arbeitshöhe [mm]	900		

Gewicht	1200	1500	1800
Ohne Installation [kg]	Ca. 220	Ca. 260	Ca. 300

Varianten	
Secuflow	optional
Ablufthaube ø	250 mm und 315 mm
Schiebefenster-Controller	optional
Innenauskleidung	Melaminharz-Beschichtung oder Vollkern Steinzeug (10 Wochen)
Abzugsseitenwand	Glaspanel und / oder Kabelschleuse
Arbeitsplatte	Steinzeug; Trichterbecken nur in Rückwand möglich
Medienzuführung	Elektroversorgung: Die Länderspezifikation entnehmen Sie bitte der Kategorie 5 (Medien) Sanitärversorgung: Bis zu 3 verschiedene Medien. Auch mehrere Anschlüsse möglich, je nach schon vorhandener Bestückung. Siehe Kategorie 5 (Medien) Medienversorgung standardmäßig von oben, falls nicht anders angegeben. Bitte geben Sie immer die Anschlusspunkte auf den technischen Zeichnungen an.
Beleuchtung	Downlight
Verglasung	ESG und VSG
Luftstromüberwachung	FAZ / AC4 ohne Busanbindung
Material	B2 Standard

! Kein Becken in der Tischplatte möglich!

WALDNER

Abzüge und Absaugungen


XPRESS

Begehbarer Abzug mit Seiteninstallation

Verwendungszweck

- Schutzeinrichtung für den Anwender, geprüft nach EN 14175
- Absaugung von Dämpfen, Aerosolen und Stäuben aus dem Abzugsinnenraum, sodass keine gefährlichen Schadstoffkonzentrationen in den Laborraum gelangen
- Verringerung des Risikos der Bildung einer hohen Gefahrstoffkonzentration / gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre im Abzugsinnenraum
- Schutz vor verspritzenden, gefährlichen Stoffen
- Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Körpern oder Teilen aus dem Abzugsinnenraum
- Nach EN 14175 gebaute Allgebrauchsabzüge sind in der Regel für Arbeiten mit radioaktiven Substanzen und Arbeiten mit Mikroorganismen nicht geeignet
- Nicht geeignet für offene Aufschlussarbeiten
- Geeignet für barrierefreies Befahren oder Begehen des Abzugsinnenraums
- Entnahmestellen in den Medienmodulen der Seitenwände des Abzugsinnenraums
- Bedienelemente außenliegend an den Medienpanels
- Geeignet für hohe Versuchsaufbauten

Maßzeichnung

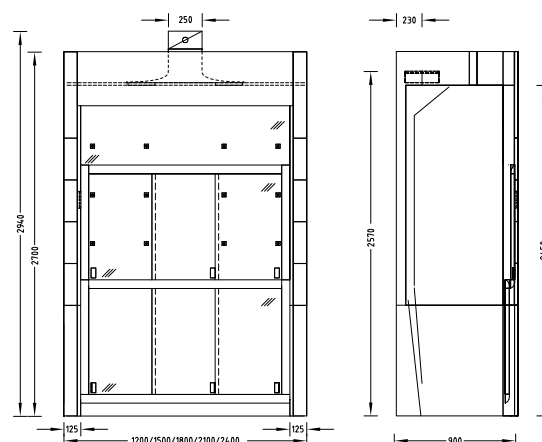

Technische Daten

Abmessungen	1200	1500	1800	2100	2400
Breite [mm]	1200	1500	1800	2100	2400
Tiefe [mm]	900				
Höhe [mm]	2700				
Nutzbreite Innenraum [mm]	950	1250	1550	1850	2150
Nutzhöhe Innenraum [mm]	2450				


Gewicht	1200	1500	1800	2100	2400
Ohne Installation [kg]	Ca. 320	Ca. 390	Ca. 450	Ca. 510	Ca. 570

Varianten	
Ablufthaube ø	250 mm und 315 mm
Schiebefenster-Controller	optional
Innenauskleidung	Melaminharz-Beschichtung oder Vollkern Steinzeug (10 Wochen)
Abzugsseitenwand	Glaspanel und / oder Kabelschleuse
Arbeitsplatte	Keine; Trichterbecken nur in Seitenwand möglich
Medienzuführung	Elektroversorgung: Die Länderspezifikation entnehmen Sie bitte der Kategorie 5 (Medien) Sanitärversorgung: Bis zu 3 verschiedene Medien. Auch mehrere Anschlüsse möglich, je nach schon vorhandener Bestückung. Siehe Kategorie 5 (Medien) Medienversorgung standardmäßig von oben, falls nicht anders angegeben. Bitte geben Sie immer die Anschlusspunkte auf den technischen Zeichnungen an.
Beleuchtung	Downlight
Verglasung	ESG und VSG
Luftstromüberwachung	FAZ / AC4 ohne Busanbindung
Material	B2 Standard

Verwendungszweck

- Schutz vor luftgetragenen Partikeln oder Aerosolen, die im Wägeprozess von pulver- oder staubförmigen Substanzen freigesetzt werden können
- Präzises und sicheres Arbeiten mit hochwirksamen Substanzen
- Auf Funktion und Ergonomie fokussiertes Design erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche

Maßzeichnung

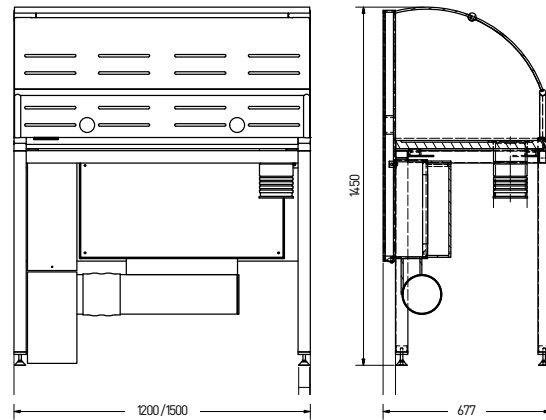

Technische Daten

Abmessungen	1200	1500
Breite [mm]	1200	1500
Tiefe [mm]	650	
Höhe [mm]	1450	
Nutzbreite Innenraum [mm]	1155	1455
Nutztiefe Innenraum [mm]	575	
Nutzhöhe Innenraum [mm]	530	
Arbeitshöhe [mm]	900	

Gewicht	1200	1500
Ohne Installation [kg]	120	135

Lüftungstechnik	
Filterung	HEPA-Filter H14 gemäß DIN EN 1822
Lüftungsanschluss Ø [mm]	160
Volumenstrom [m³/h]	140
Druckverlust [PA]	80
Spannung [V]	230
Leistungsaufnahme [W]	250


XPRESS

Secuflow EN7 Abzug für hohe thermische Lasten

Verwendungszweck

- Für Arbeiten mit hohen thermischen Lasten im Abzugsinnenraum (Wärmequellen von 4 KW je Meter lichte Breite des Abzugs)
- Schutteinrichtung für den Anwender, geprüft nach DIN EN 14175-7:2012
- Absaugung von Dämpfen, Aerosolen und Stäuben aus dem Abzugsinnenraum, sodass keine gefährlichen Schadstoffkonzentrationen in den Laborraum gelangen
- Verringerung des Risikos der Bildung einer hohen Gefahrstoffkonzentration / gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre im Abzugsinnenraum
- Schutz vor verspritzenden, gefährlichen Stoffen
- Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Körpern oder Teilen aus dem Abzugsinnenraum
- Nach EN 14175 gebaute Abzüge sind für Arbeiten mit radioaktiven Substanzen und Arbeiten mit Mikroorganismen nicht zugelassen
- Nicht geeignet für offene Aufschlussarbeiten
- Reduktion des Energieverbrauchs durch aktive Stützstrahltechnik (Secuflow-Technik) unter Einhaltung der Vorschriften und Normen
- Entnahmestellen für Sanitärversorgung in der Rückwand des Abzugsinnenraums
- Bedienelemente außenliegend an der Traverse

Maßzeichnung

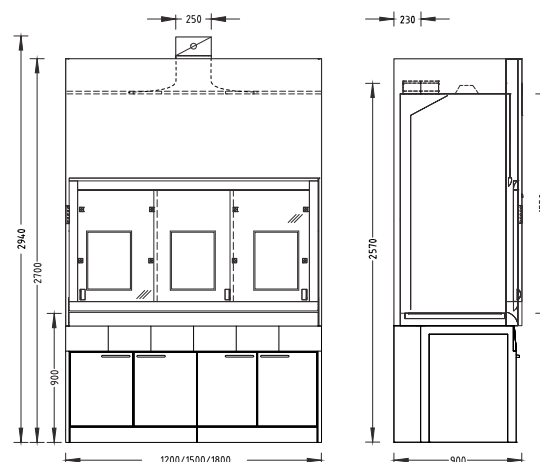

Technische Daten

Abmessungen	1200	1500	1800
Breite [mm]	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	900		
Höhe [mm]	2700		
Nutzbreite Innenraum [mm]	1150	1450	1750
Nutzhöhe Innenraum [mm]	1550		
Arbeitshöhe [mm]	900		

Gewicht	1200	1500	1800
Ohne Installation [kg]	Ca. 250	Ca. 300	Ca. 350

Ausführungsmerkmale	1200	1500	1800
Tragkonstruktion	Selbsttragende Unterbauten oder H-Fuß-Tischgestell mit eingeschobenen Unterbauten		
Frontschieber	2 Querschieber		3 Querschieber
Abzugsseitenwand	voll		
Max. Anzahl Vorrichtungen für Stativhalter, ø 12 mm bis 13 mm	9		12
Maximale Tragkraft pro Stativhalter mit Stativstab Länge 300 mm [kg]	5		
Medienmodule	2		3

XPRESS

Secuflow EN7 Abzug für hohe thermische Lasten

Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Steckdosen außen in Medienpanel
Elektroabsicherung	Optional
Schiebefenster-Controller SC	Optional

Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Optional Medienmodule mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wasser und integriertem Becken (PP)

Lüftungstechnik	1200	1500	1800
Volumenstrombereich ohne /mit thermischer Last [m³/h] ¹⁾	450/700	450/750	540/900
Funktionsanzeige mit Temperaturüberwachung	FAZ		
Volumenstromregler, konstant mit Temperaturüberwachung	Airflow-Controller AC		
Volumenstromregler, variabel mit Temperaturregelung	Airflow-Controller AC		
Querschieberfassung	Nur bei Airflow-Controller AC variabel		
Anschlusshöhe [mm] bei FAZ mit Ablufthaube Ø 250 mm	2570		
Anschlusshöhe [mm] bei FAZ mit Ablufthaube Ø 315 mm ²⁾	2570		
Anschlusshöhe [mm] bei AC mit Ablufthaube Ø 250 mm	2940		
Anschlusshöhe [mm] bei AC mit Ablufthaube Ø 315 mm ²⁾	2910		
Unterbauabsaugung	Optional je nach Anforderung und Vorschrift		

¹⁾ Sämtliche Luftmengenangaben beziehen sich auf eine Öffnungshöhe des Frontschiebefensters von 500 mm (Prüföffnung nach EN 14175) und die empfohlenen Spürgas-Höchstwerte der BG Chemie.

²⁾ Um Geräusche und Druckverluste zu minimieren, empfiehlt Waldner bei Luftmengen >1000 m³/h die Ablufthaube mit Anschlussdurchmesser 315 mm.

Ein maximaler Vordruck von 600 Pa bei Abzügen mit Volumenstromreglern sollte nicht überschritten werden.

Die angegebenen Mindestvolumenströme wurden nach EN 14175-3 unter definierten Prüfbedingungen ermittelt. Für die Auslegung der Lüftungsanlage müssen diese Mindestvolumenströme angepasst werden.

Bei Verwendung von bauseitigen Abluftüberwachungssystemen oder Volumenstromreglern können die erforderlichen Luftmengen abweichen. Die Betriebsgrenzen müssen mit Waldner abgestimmt werden.

Material/Oberfläche	
Arbeitsplatte	Steinzeug
Innenauskleidung	Melaminharz-Beschichtung Vollkern Steinzeug

! Kein Becken in der Tischplatte möglich!


! Secuflow EN7 ist nur im 10-Wochen-Programm möglich!

Verwendungszweck

- Für den Einsatz an frei wählbaren Standorten (nur bei Umluftbetrieb)
- Bedienelemente außenliegend
- Nicht geeignet für offene Aufschlussarbeiten
- Nicht geeignet als Ersatz für Tischabzüge gemäß EN 14175


Aufbau

Umluftbetrieb

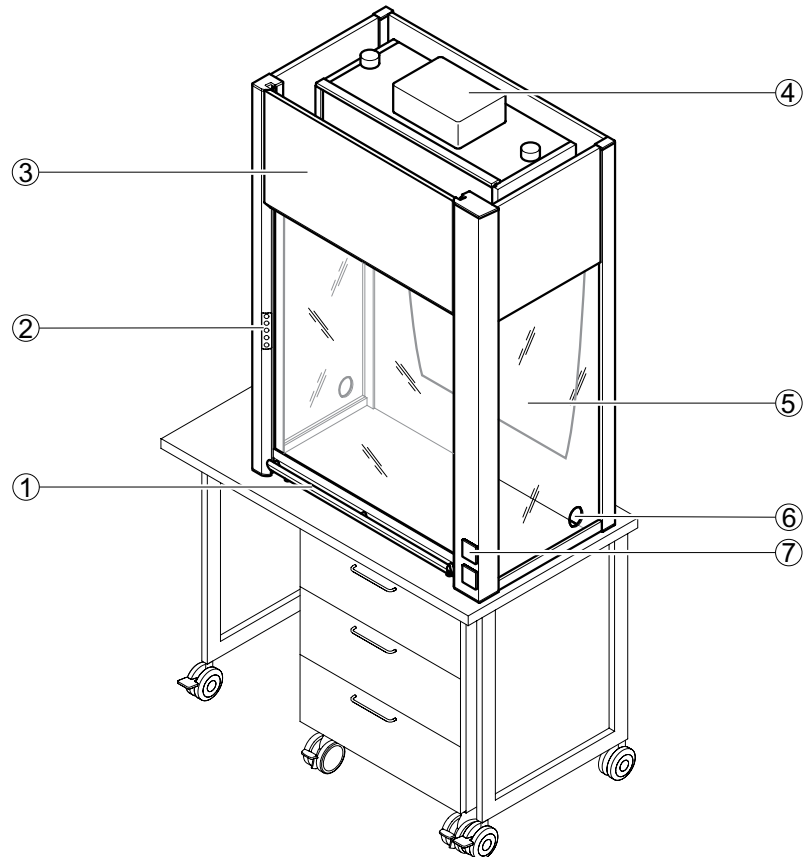

- 1 Frontschieber mit Griffleiste
- 2 Bedienfeld FAZ
- 3 Abnehmbare Frontblende
- 4 Filtergehäuse mit Ventilator im Umluftbetrieb
- 5 Rückwand mit Luftleitprofil
- 6 Schleuse
- 7 Steckdosen

Abluftbetrieb

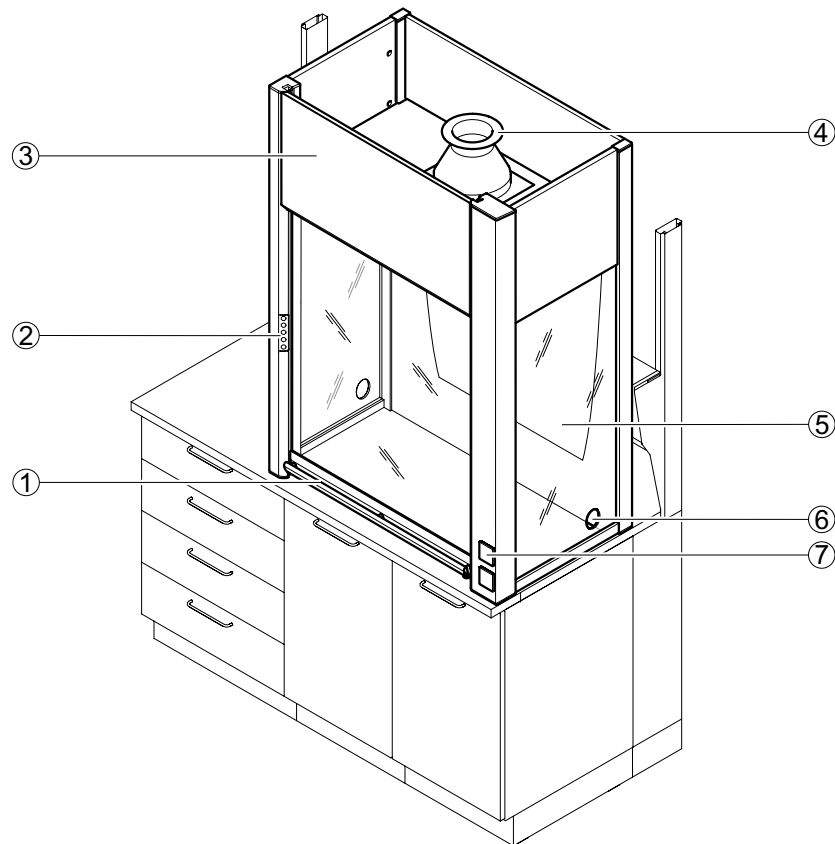

- 1 Frontschieber mit Griffleiste
- 2 Bedienfeld FAZ
- 3 Abnehmbare Frontblende
- 4 Abluftstutzen
- 5 Rückwand mit Luftleitprofil
- 6 Schleuse
- 7 Steckdosen

Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm]	900
Tiefe [mm]	600
Höhe bei geschlossenem/geöffnetem Frontschieber [mm]	1215/1620
Eingriffsbreite [mm]	730
Nutzbreite Innenraum [mm]	850
Nutztiefe [mm]	503
Nutzhöhe Innenraum bis Lampe [mm]	846
Nutzhöhe Innenraum bis Decke [mm]	935
Gewicht	
MobilAir für Abluftbetrieb [kg]	Ca. 70
MobilAir für Umluftbetrieb inkl. Filter [kg]	Ca. 82

Ausführungsmerkmale	
Umluftbetrieb	Mit Ventilator und Filter (s.u. Filtertypen)
Abluftbetrieb	Abluftanschluss an bauseitiges Abluftsystem angeschlossen
Beleuchtung	Blendfrei, von außen schaltbar
Frontschieber	Nach oben verschiebbar
Schleuse	Linke und rechte Abzugsseite

Elektrotechnik	
Elektroversorgung	2 Steckdosen außen
Gesamtleistung Steckdosen [W]	1000
Anschlussspannung [V AC]	230
Beleuchtung [W]	13
Ventilatorleistung [W]	115

Lüftungstechnik	
Mindestvolumenstrom [m³/h]	300
Funktionsanzeige	Optional FAZ
Anschlusshöhe [mm] Abluftstutzen Ø 125 mm	1137

Material	
Seitenausführung, Frontschieber	Plexiglas

Filtertyp „A“ Nr. 5, Gasfilter	
Abmessungen [mm]	610 x 305 x 150 (+ 8 mm Dichtung)
Druckverlust [Pa] bei 300 m³/h	130
Ausführungsmerkmale	Gasfilterzelle mit 5 Lagen Aktivkohlematte Typ „A“; Rahmen MDF, beidseitig Gitter weiß lackiert, mit Griffband und Typenschild auf der 610-mm-Seite, PU-Dichtung auf der Staubluftseite
Verwendung	Abscheidbare Stoffe: organische Gase und Dämpfe (z.B. Lösemittel, Benzindämpfe, Toluol, Benzol, Kerosin, Gerüche, Kohlenwasserstoffe mit molarer Masse (g/mol) 30 und höher) in kalter Form, nicht kochend (VOC, Hochsieder)

Filtertyp „BEP“, Filterzelle-Gas	
Abmessungen [mm]	610 x 305 x 150 (+ 8 mm Dichtung)
Druckverlust [Pa] bei 300 m³/h	240
Ausführungsmerkmale	Kombinationsfilter Hepa H13 mit Aktivkohlematte und Partikelfilter Typ „BEP“; Rahmen MDF, beidseitig Gitter weiß lackiert, mit Griffband und Typenschild auf der 610-mm-Seite, PU-Dichtung auf der Staubluftseite
Verwendung	Abscheidbare Stoffe: anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoffe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoffe in kalter und erhitzter Form). Moleküle und Partikelabscheidung 99,95 % MPPS


Filtertyp „P“, Schwebstofffilterzelle	
Abmessungen [mm]	610 x 305 x 150 (+ 8 mm Dichtung)
Druckverlust [Pa] bei 300 m³/h	150
Ausführungsmerkmale	Partikelfilter Typ „P“, Hepa H13, Midilar MDSA; Rahmen MDF, beidseitig Gitter weiß lackiert, mit HD-Griff und Typenschild auf der 610-mm-Seite, Faltenhöhe 45 mm, PU-Dichtung auf der Staubluftseite, Filtermedium bündig auf der Staubluftseite
Verwendung	Abscheidbare Stoffe: Partikelabscheidung 99,95 % MPPS, Hepa H13

! MobilAir ist nur im 10-Wochen-Programm möglich!

Verwendungszweck

- Für die Absaugung von Sicherheitsschränken (Unterbauten), in denen Gefahrenstoffe gelagert sind
- Für die Absaugung von Unterbauten in Medienzellen und Abzügen

Aufbau

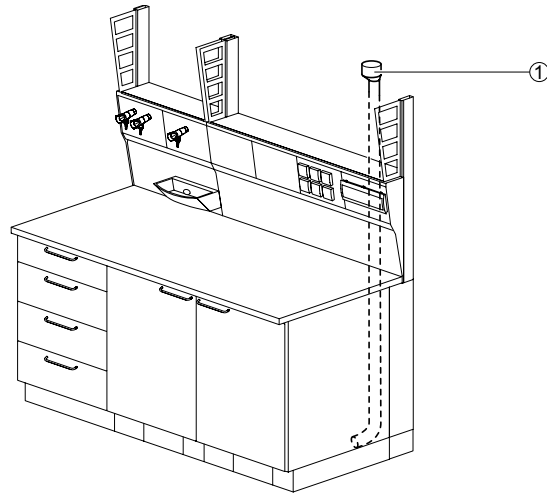

1 Abluftstutzen

Technische Daten


Lüftungstechnik	
Volumenstrom [m³/h]	40
Lüftungsanschluss (Steigkanal) Ø [mm]	90
Material	
Lüftungsrohr	PPS

XPRESS Absaugarm

Verwendungszweck

- Für die gezielte Absaugung eines Bereichs
- Zur Befestigung an Medienzellen oder zur Wandmontage

Aufbau

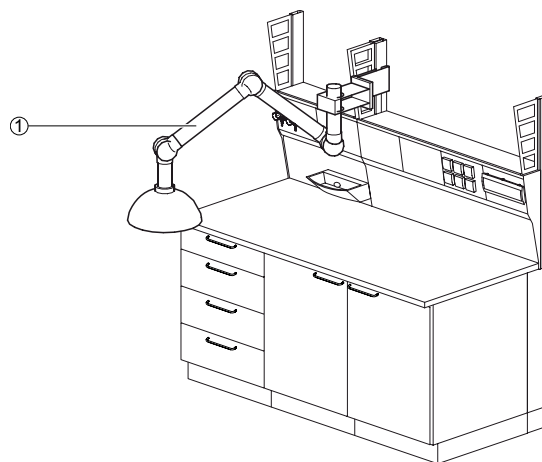

1 Absaugarm

Technische Daten

Abmessung	50	75
Rohrleitungssystem Ø [mm] ¹⁾	50	75
Kuppelhaube Ø [mm]	350	
Saugspitze [mm]	50	75

¹⁾ Rohrleitungssystem Ø 50 mm nur für Befestigung an Medienflügel


Lüftungstechnik	50	75
Mindestvolumenstrom [m³/h]	50	100
Vordruck [Pa]	150	
Vordruck [Pa] mit Volumenstromregler von Waldner	200	

Material	
Rohrleitung	Aluminium eloxiert
Gelenkarm	Polypropylen
Kuppelhaube	Polycarbonat
Saugspitze	Aluminium eloxiert

Verwendungszweck

- für die gezielte Absaugung eines Bereichs
- Zur Befestigung an Medienzellen und an der Wand

Aufbau

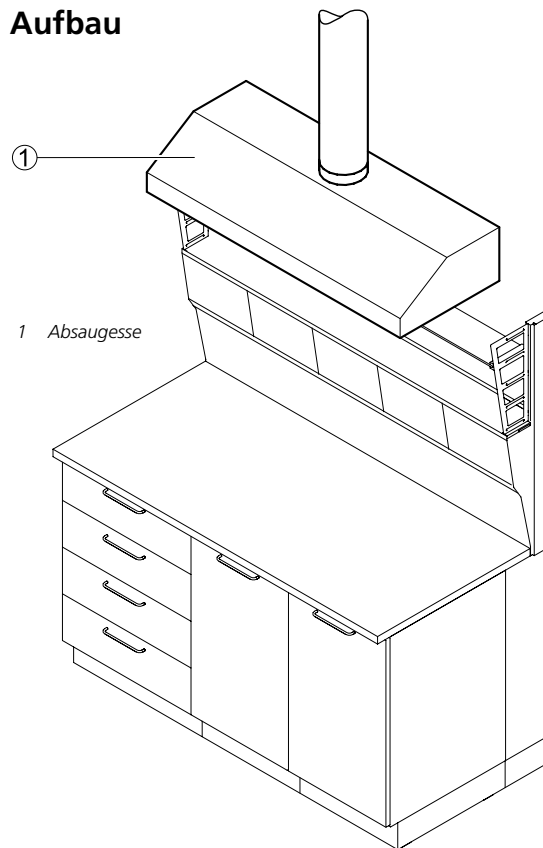


Technische Daten

Abmessungen	1200	1500
Breite [mm]	1200	1500
Höhe x Tiefe [mm]	300 x 600	
Abluftstutzen Ø [mm]	200	
Lüftungstechnik	1200	1500
Mindestvolumenstrom [m³/h]	480	600
Vordruck [Pa]	25	30
Vordruck [Pa] mit Volumenstromregler von Waldner	150	
Material		
Absaugesse	Polypropylen	

Verwendungszweck


- Medienversorgung an Laborarbeitsplätzen
- Integration aller Entnahmestellen einschließlich Steckdosen und Steckverbindungen für die Informationstechnik
- Erweiterung und Veränderung der Medienversorgung durch Medienpanels zum Einclipsen
- Verwendung in Medienzellen, Medienwandkanälen, Medienampeln und Medientischaufsätzen
- Werkzeuglose Montage von ergänzenden Medienkanal-Anbauteilen wie Abtropfbord, Monitorhalter, Pipettenhalter, Papierrollenhalter, Universalablage etc.

Aufbau

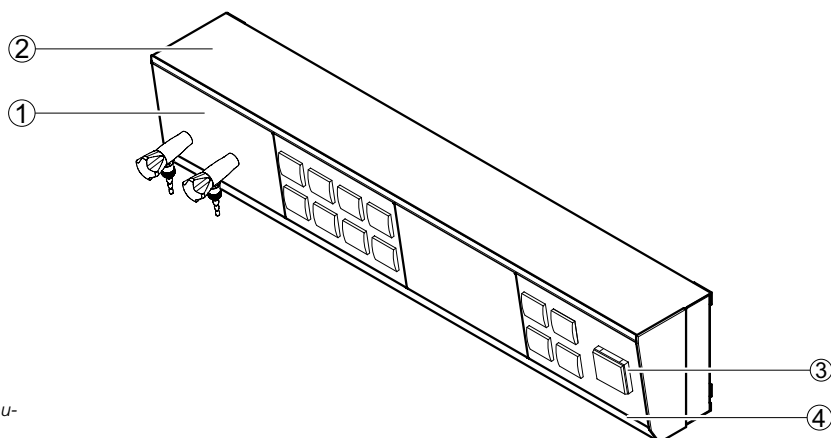

- 1 Medienpanel mit Eckventilen
2 Ablage
3 Medienpanel mit Steckdosen
4 Integralschiene zur werk-
zeuglosen Montage von Anbau-
teilen

Varianten der Medienpanel

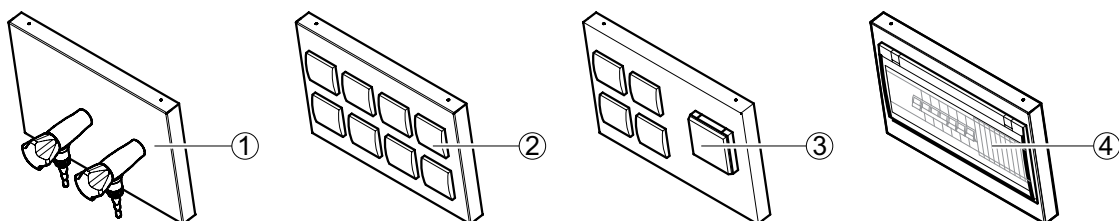

- 1 Medienpanel mit Eckventilen
2 Medienpanel mit 8 typengleichen Steckdosen
3 Medienpanel mit unterschiedlichen Typen von Steckdosen
4 Medienpanel mit Sicherungsautomaten

Technische Daten


Material	
Elektroversorgung	Die Länderspezifikationen entnehmen Sie bitte der Kategorie 5 (Medien)
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wasser Zuführung Medien entsprechend Kombination mit anderen Medienträgern Maximal 5 Gase / Wasser oder max. 2 Reinstgase möglich. Weitere Details siehe Kategorie 5 (Medien)
Medienzufuhr	Standardmäßig von oben, falls nicht anders auf der technischen Zeichnung angegeben

Intended use

- Services supply from the ceiling for:
 - ▶ Laboratory benches below the suspended service column
 - ▶ Laboratory equipment on mobile tables or underbench constructions
 - ▶ Floor-mounted laboratory equipment
- Version with one or two sides

Design

- A: SimplyMount, for fastening to bare ceilings or walls
 B: SimplyMove, for fastening to ceiling grids / beams
 C: SimplyMobile, for fastening to moveable base frames

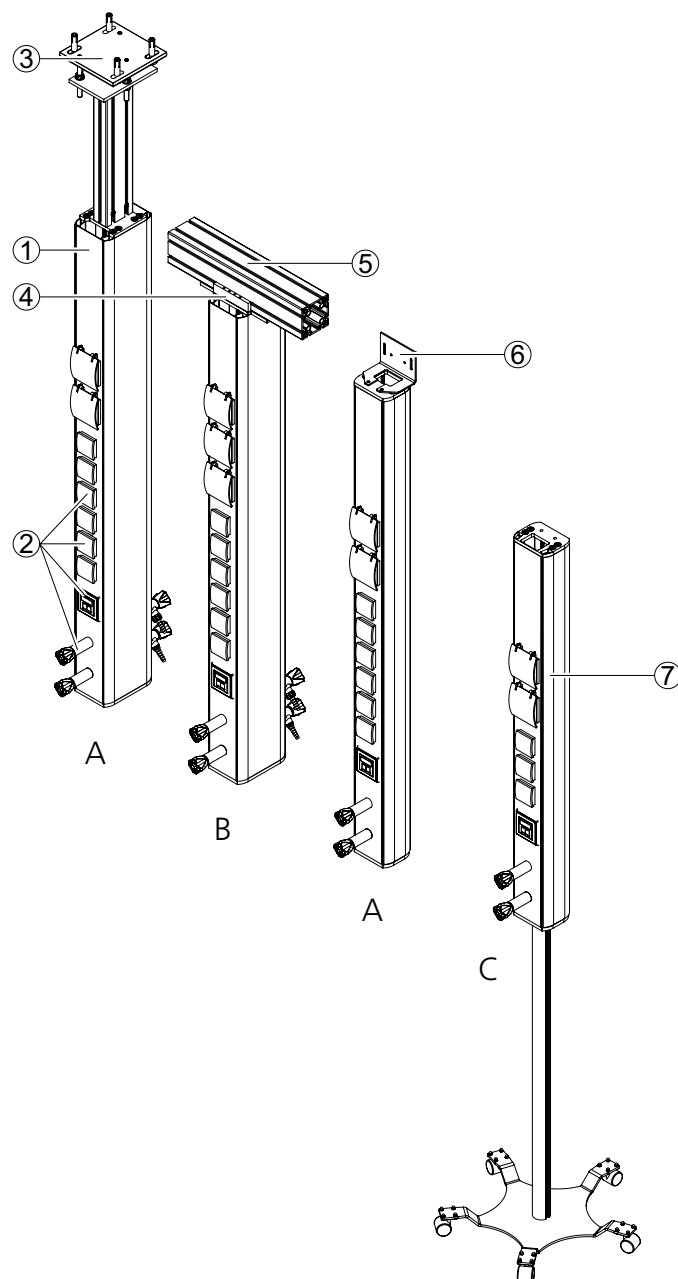


- 1 Elektroabdeckung für Anschlussklemmen
- 2 Separate Panels für Eckventile, Steckdosen und EDV
- 3 Rohdeckenabhängung mit Stahlplatte und
Profilabhängung
- 4 Mediensäule ein-/doppelseitig an Deckenraster / Joch
mit integrierter Fallsicherung und Schiebeelement
- 5 Mediendecke, Jochkonstruktion durch Waldner
- 6 Befestigung für Wandmontage
- 7 Mediensäule rollbar

XPRESS Mediensäule


**Befestigungsvarianten SimplyMove
am Deckenrasterprofil 100x100mm
im Raum / Doppeltischachse**

- 1 Deckenraster-/ Jochprofil
- 2 Doppelseitig bestückte Mediensäule
an Deckenrasterprofil
- 3 Einseitige Mediensäule Rücken an Rücken
am Deckenrasterprofil gegeneinander
verschiebbar.

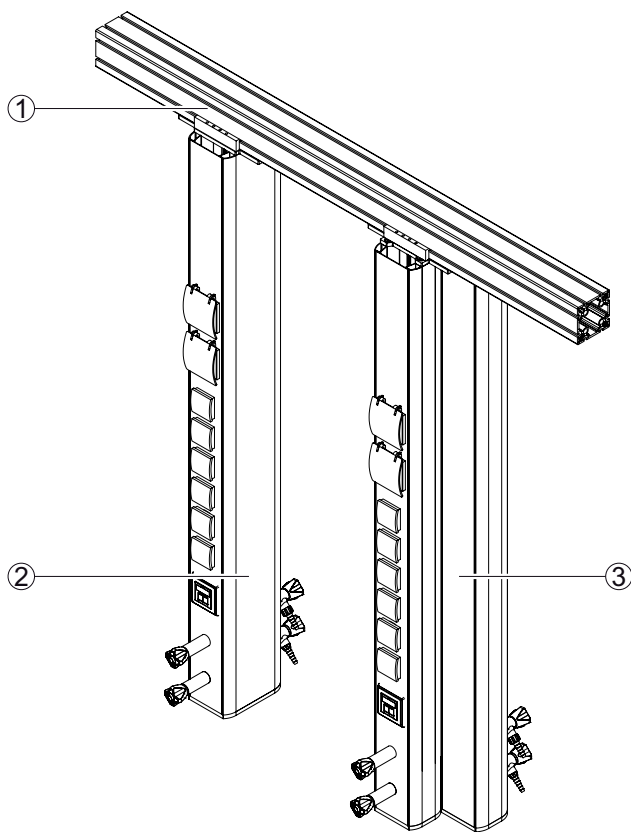

**Befestigungsvarianten SimplyMove
am Deckenrasterprofil 50x100mm
vor Trennwand / Wandzeile:**

- 1 Einseitig bestückte Mediensäule
an Deckenrasterprofil im Wandbereich
- 2 Einseitig bestückte Mediensäule vor dem
Deckenrasterprofil fixiert, (bei Ausführung
Trennwand befestigt am Profil im Raum)

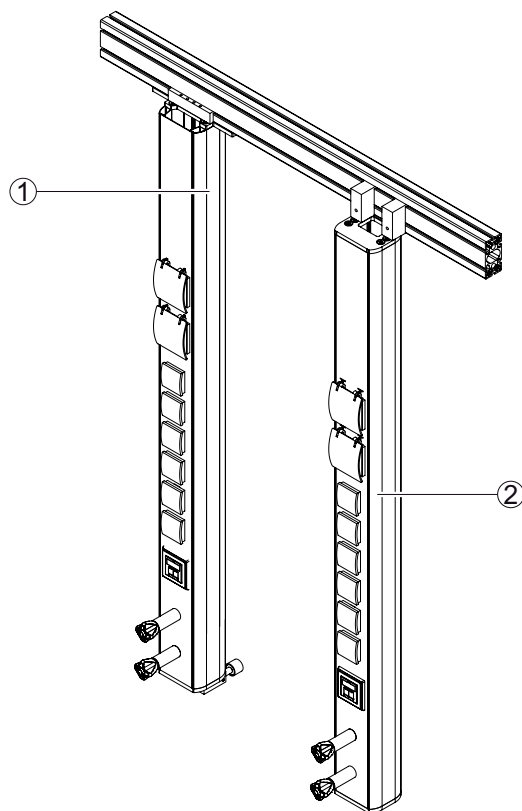


Technische Daten


Abmessungen	
Breite [mm]	130 / 190
Tiefe [mm] einseitig	100
Tiefe [mm] doppelseitig	180
Höhe [mm]	910 + 1520 + 1820
Höhe Tragkonstruktion [mm] (bis max. Deckenhöhe 4500 mm)	Angepasst an Deckenhöhe
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	100 / 160 x variabel abhängig von Bestückung

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Vertikaler Medienträger, ein- oder doppelseitig bestückbar Direkt an das Alu-Trägersystem angeflanscht oder an die Rohdecke, Wand montiert
Bestückung	Eckventile, Reingasarmaturen, Steckdosen und EDV Dosen abhängig von Anforderung möglich


Bestückungsvarianten R1800

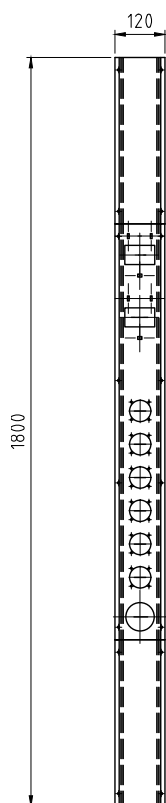


1x EDV, 6x 230V
2x Sicherungsfenster klein

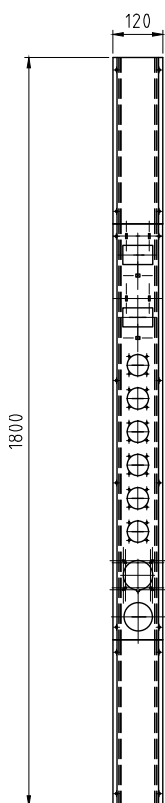


1x EDV, 1x 400V, 6x 230V
2x Sicherungsfenster klein

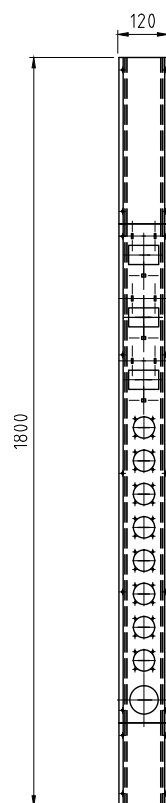


1x EDV, 8x 230V
3x Sicherungsfenster klein

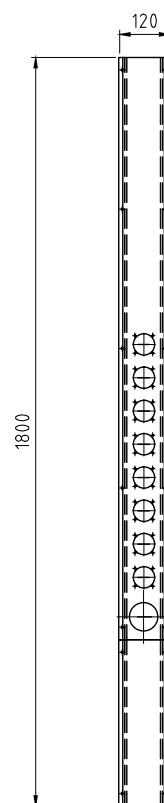


1x EDV, 8x 230V

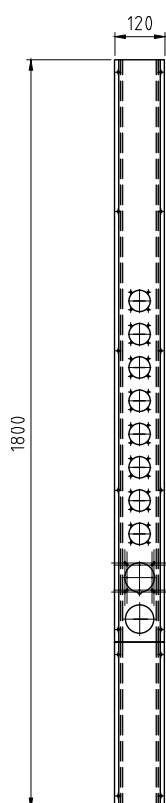


1x EDV, 1x 400V, 8x 230V

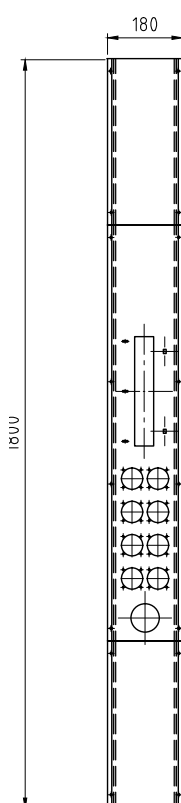

1x EDV, 8x 230V
1x Sicherungsfenster groß

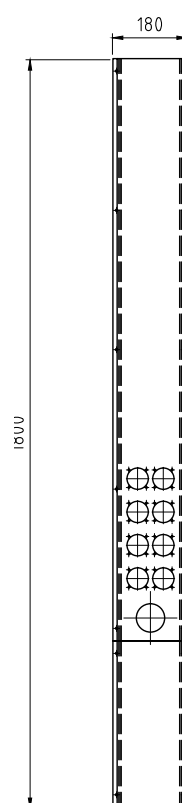


1x EDV, 8x 230V

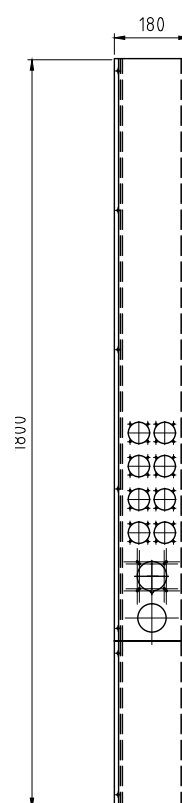


1x EDV, 1x 400V, 8x 230V


Bestückungsvarianten R1500

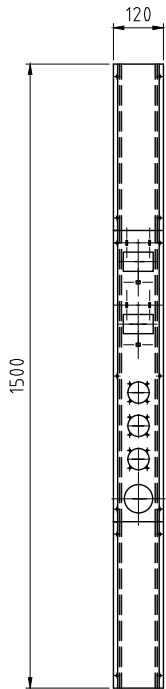


1x EDV, 3x 230V
2x Sicherungsfenster klein

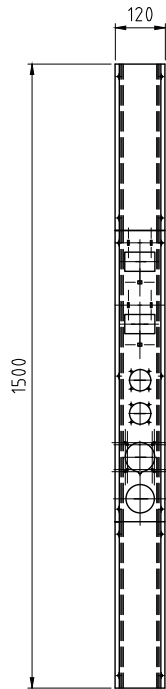


1x EDV, 1x 400V, 2x 230V
2x Sicherungsfenster klein

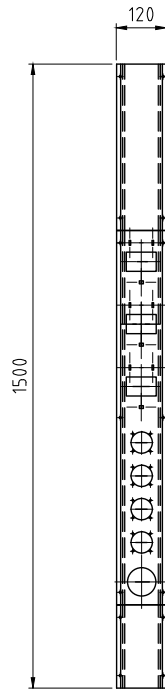


1x EDV, 4x 230V
3x Sicherungsfenster klein

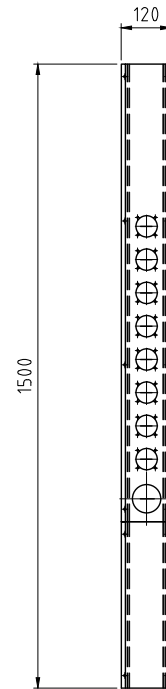


1x EDV, 8x 230V

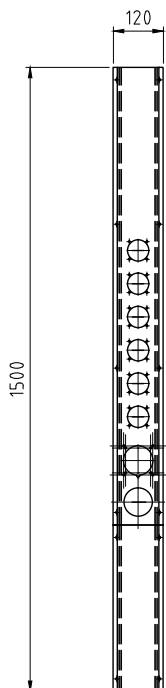


1x EDV, 1x 400V, 6x 230V

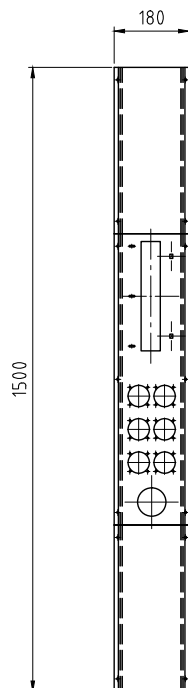

1x EDV, 6x 230V
1x Sicherungsfenster groß

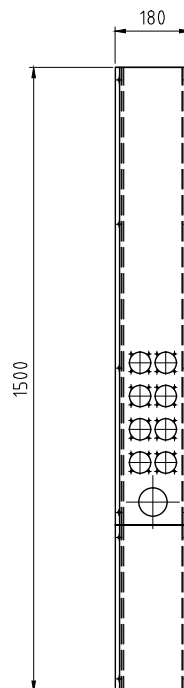


1x EDV, 8x 230V

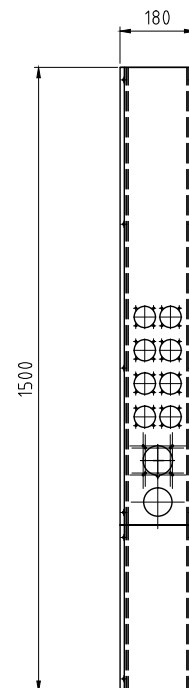

1x EDV, 1x 400V, 8x 230V

Maßzeichnung

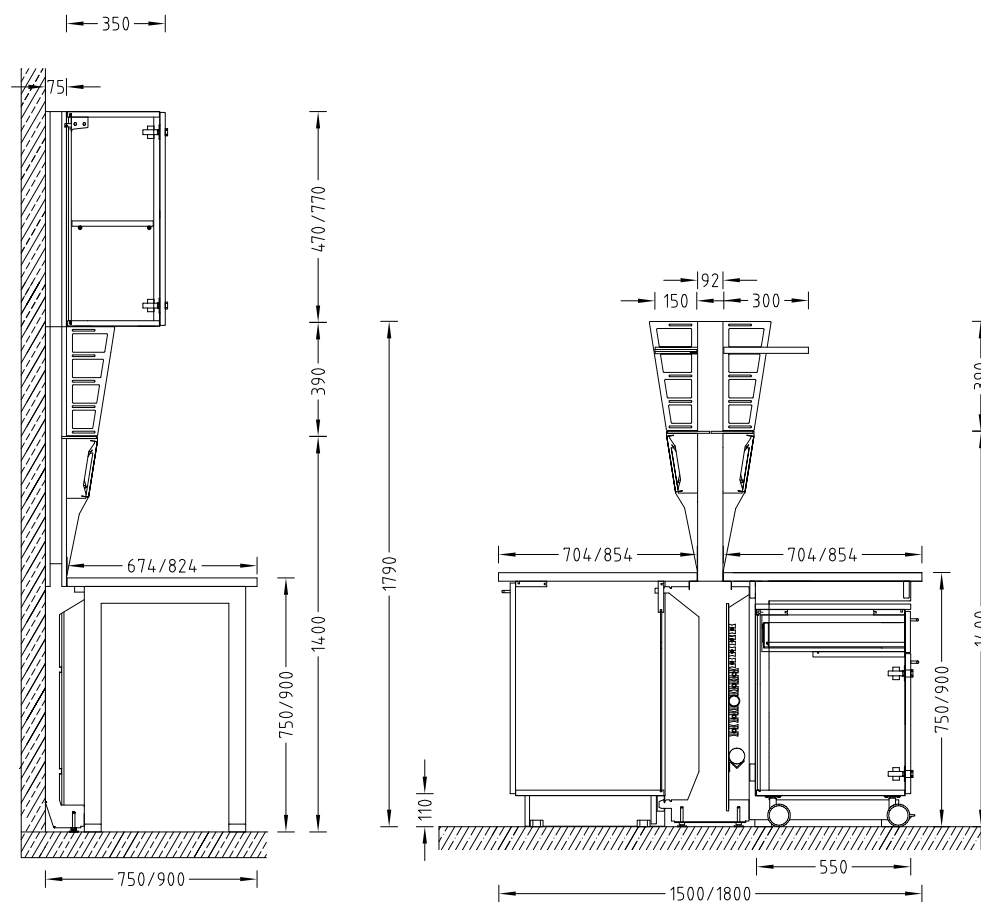

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe Medienzelle für Wandarbeitstisch [mm] (inkl. Wandarbeitstisch)	75 (750/900)				
Tiefe Medienzelle für Doppelarbeitstisch [mm] (inkl. Doppelarbeitstisch)	92 (1500/1800)				
Höhe [mm]	1790				
Arbeitshöhe [mm]	750 900				
Höhe Ständerverlängerung [mm] für Hängeschränk Höhe 460 mm	462				
Höhe Ständerverlängerung [mm] für Hängeschränk Höhe 760 mm	762				
Höhe Ständerverlängerung [mm] bis Deckenhöhe 3500 mm	Abhängig von Deckenhöhe				
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	300 x 200				
Ablage aus Glas Breite x Tiefe [mm]	Breite Medienzelle x 150				
Ablage aus beschichteter OSB-Platte Breite x Tiefe [mm]	Breite Medienzelle x 300				

Technische Daten


Tragkraft	
Ablage aus Glas [kg]	20
Ablage aus beschichteter OSB-Platte [kg]	30
Maximale Tragkraft pro Stativhalter mit Stativstab Länge 300 mm [kg]	5
Ausführungsmerkmale	
Modularer Aufbau	Für Wandarbeitstisch einseitig, für Doppelarbeitstisch beidseitig bestückbar Funktionsständer mit Medienkanal verlängerbar, z. B. für Hängeschränke Arbeitsplatte, Konsole und Unterbau ohne Demontage der Installationen austauschbar Rasterunabhängige Montage von Zubehör
Stativhalter ø [mm]	12 bis 13
Anzahl Medienpanel	Abhängig von Breite Medienkanal
Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Steckdosen in Medienpanel
Elektroabsicherung	Optional
Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wässer Führung der Versorgungsleitungen unterhalb der Arbeitsplatte oder unterhalb der Konsole

Verwendungszweck

- Medienversorgung über die Decke für:
 - Labortische unter der Medienampel
 - Laborgeräte auf Rolltischen oder Unterkonstruktionen
 - Bodenständige Laborgeräte
- Ausführungsvarianten für gentechnische Bereiche
- Modulare Befestigung von Ampelanbauteilen an der Tragekonstruktion wie Ablagen aus Glas und beschichteter OSB-Platte, Stativhalter etc.
- Werkzeuglose Montage von ergänzenden Medienkanal-Anbauteilen wie Monitorhalter, Pipettenhalter, Papierrollenhalter, Universalablage etc.

Aufbau

- 1 Medienpanel mit Steckdosen
- 2 Medienpanel mit Eckventilen
- 3 Ablage aus beschichteter OSB-Platte
- 4 Medienzuführungsschacht
- 5 Deckenanker
- 6 Funktionsträger
- 7 Ablage aus Glas
- 8 Wange
- 9 Ablage Medienkanal
- 10 Medienkanal

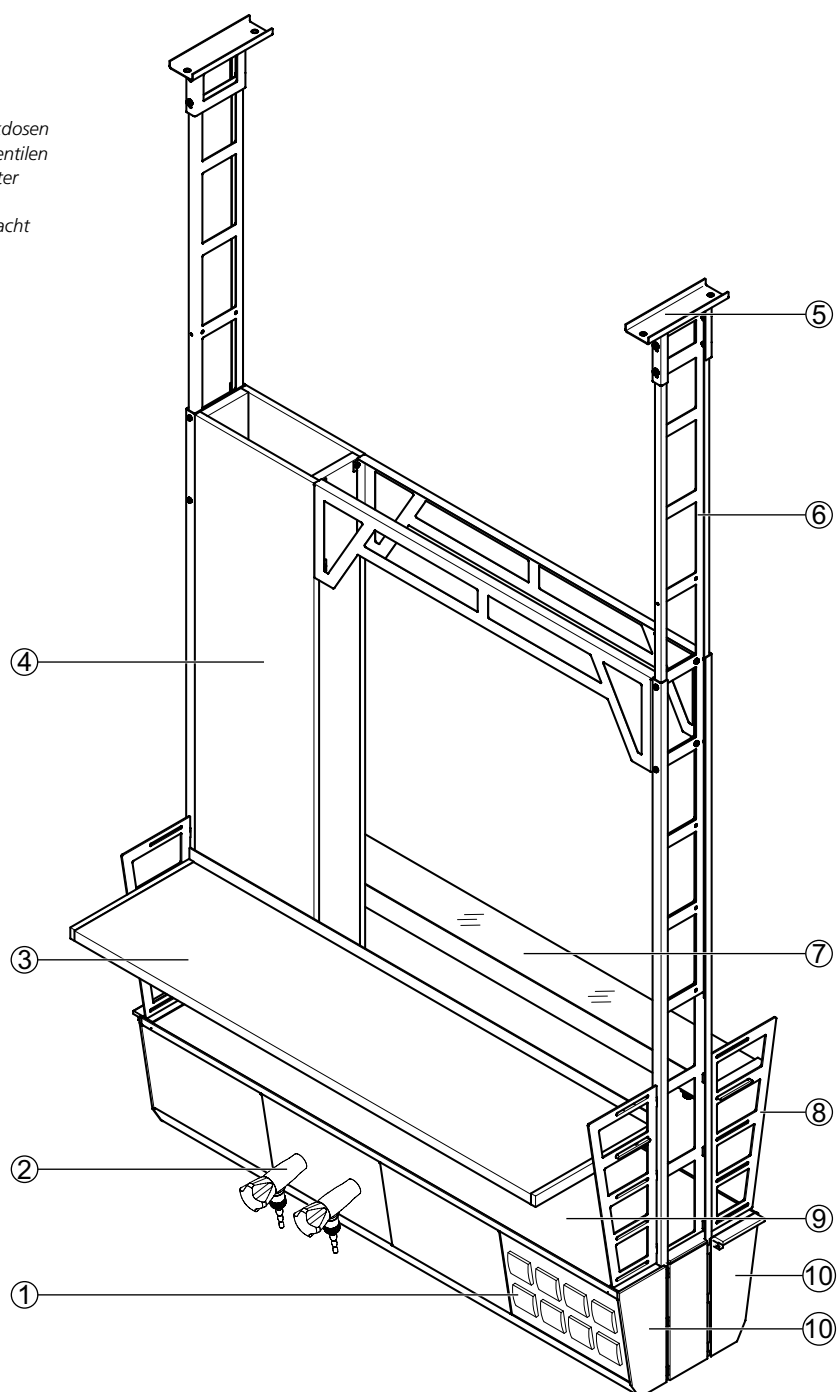

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe [mm] ohne Wangen	350				
Tiefe [mm] mit Wangen	471				
Empfohlene Mindesthöhe [mm] Unterkante Medienampel bis Oberkante Fertigfußboden (FFB)	1750				
Höhe Tragkonstruktion (bis max. Deckenhöhe 4000 mm)	Abhängig von Deckenhöhe				
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	300 x 200				
Ablage aus Glas Breite x Tiefe [mm]	Breite Medienampel x 150				
Ablage aus beschichteter OSB-Platte Breite x Tiefe [mm]	Breite Medienampel x 300				

Tragkraft	
Maximale zulässige Gesamtbelastung [kg]	120
Zusätzliche max. Tragkraft Medienampel [kg] pro Raster	30
Ablage aus Glas [kg]	20
Ablage aus beschichteter OSB-Platte [kg]	30
Maximale Tragkraft pro Stativhalter mit Stativstab Länge 300 mm [kg]	5

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	An der Decke befestigte und verbundene Funktionsträger zur Aufnahme von Medienkanälen
Anzahl Medienpanels (pro Seite)	Abhängig von Breite Medienkanal
Stativhalter ø [mm]	12 bis 13

Material	
Ablage Medienkanal	Vollkern 5 mm


Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Steckdosen in Medienpanel
Elektroabsicherung	Optional

Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wasser Versorgungsleitungen in Versorgungsschacht von oben

Verwendungszweck

- Medienversorgung zum Anklemmen an einen Laborarbeitsplatz
- Versorgung der Station über einen an der Decke montierten Medienträger wie Medienampel, Mediensäule, Medienflügel, Mediendecke oder über eine bodenständige Medienzelle

Aufbau

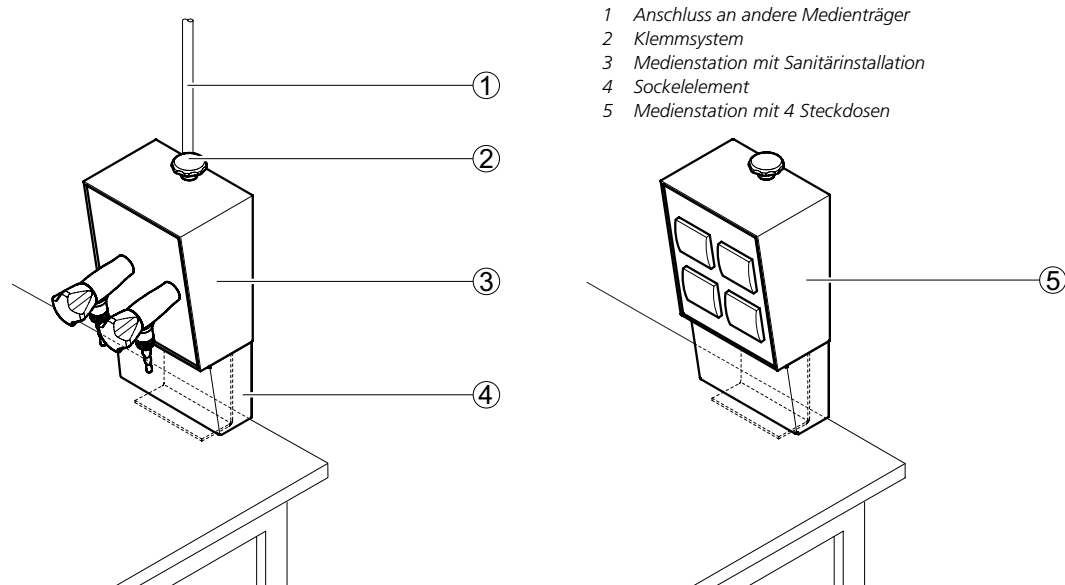


Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm]	158
Tiefe [mm]	118
Höhe [mm]	205
Höhe inkl. Sockelelement [mm]	310
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	150 x 200
Klemmbereich [mm]	10 - 100
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Klemmsystem für Arbeitsplatte oder anderen Träger Medienversorgung über deckenmontierte Medienträger oder Medienzellen Zugentlastung für Leitungen zwischen Medienstation und Medienträgereinheit durch Medienthorax und Spangen Kabel und Schläuche über Steckkupplungen mit Medienträger verbunden
Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Max. 4 Steckdosen 230 V in Medienpanel
Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Verschiedenste Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase oder Druckluft
Max. Anzahl Eckventile pro Medienpanel	2
Max. Anzahl Reinstgasarmaturen pro Medienpanel	1 oder 2 (abhängig von Typ und Funktion)

Verwendungszweck

- Wandbefestigte Medienversorgung für:
 - Labortische unter oder vor dem Medienwandkanal
 - Laborgeräte auf Rolltischen oder Unterkonstruktionen
 - Bodenständige Laborgeräte
- Ausführungsvarianten für gentechnische Bereiche
- Werkzeuglose Montage von ergänzenden Medienkanal-Anbauteilen wie Monitorhalter, Pipettenhalter, Papierrollenhalter, Universalablage etc.

Aufbau

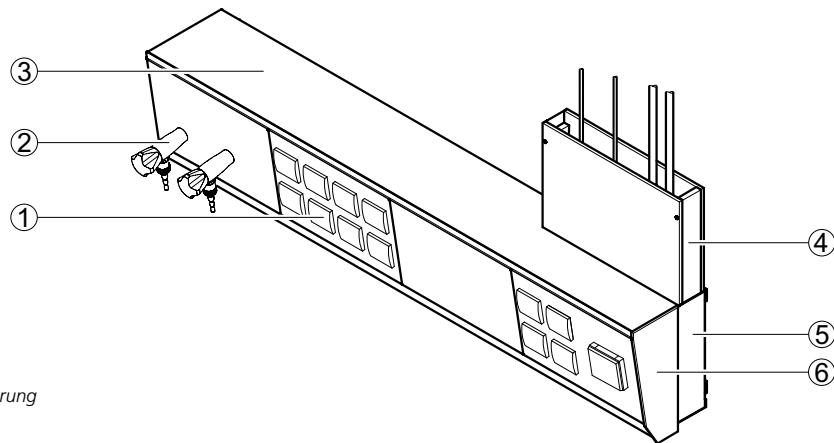

- 1 Medienpanel mit Steckdosen
- 2 Medienpanel mit Eckventilen
- 3 Ablage Medienwandkanal
- 4 Medienzuführung von oben
- 5 Befestigungsprofil/Medienführung
- 6 Medienkanal

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800 ¹⁾
Tiefe [mm]	184				
Höhe [mm]	252				
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	300 x 200				

¹⁾ Der Medienwandkanal ist in Rasterbreiten von 300 mm beliebig verlängerbar.

Tragkraft	
Ablage [kg]	20 je montiertem Raster

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Medienkanal zur Wandmontage inkl. Lösung für Innenecke
Anzahl Medienpanels	Abhängig von Breite Medienkanal

Material	
Ablage	Vollkern 5 mm

Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Medienpanel mit Steckdosen
Elektroabsicherung	Optional

Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wässer Versorgungsleitungen im Befestigungsprofil


XPRESS Medientischaufsatz

Verwendungszweck

- Medienversorgung für Doppelarbeitstische
- Ausführungsvarianten für gentechnische Bereiche
- Modulare Befestigung von Zellenanbauteilen am Funktionsständer wie Ablagen aus Glas und beschichteter OSB-Platte, Hängeschränken, Stativhaltern etc.
- Werkzeuglose Montage von ergänzenden Medienkanal-Anbauteilen wie Abtropfbord, Monitorhalter, Pipettenhalter, Papierrollenhalter, Universalablage etc.
- Nicht geeignet für Doppeltische, deren Arbeitsflächen getrennt sein müssen (vgl. hierzu BGI/GUV-I 850-0)

Aufbau


Medientischaufsatz mit C-Fuß-Tischgestell und eingehängtem Unterbau

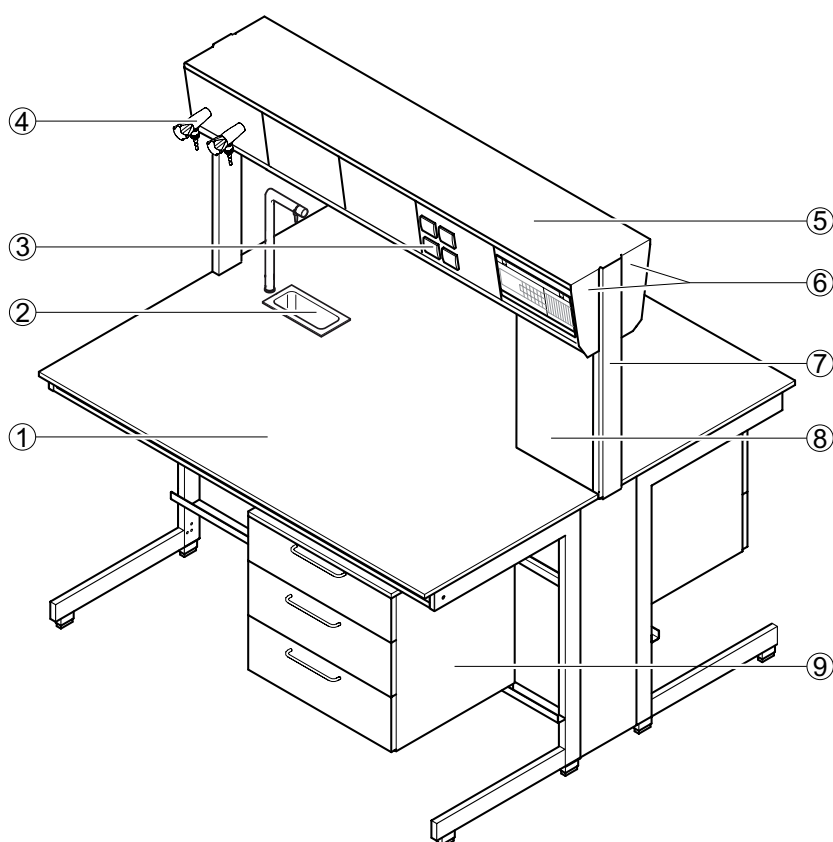


- 1 Arbeitsplatte
- 2 Trichterbecken mit Wasserentnahme
- 3 Medienpanel mit Steckdosen
- 4 Medienpanel mit Eckventilen
- 5 Ablage Medientischaufsatz
- 6 Medienkanal
- 7 Funktionsständer
- 8 Medienzuführungsschacht
- 9 Eingehängter Unterbau

! Medientischaufsatz nicht mit Steinzeugtischplatte kombinierbar, da Ausschnitte nicht möglich sind!

**Medientischaufsatz mit Hängeschränken,
H-Fuß-Tischgestell und Unterbauten auf Rollen**

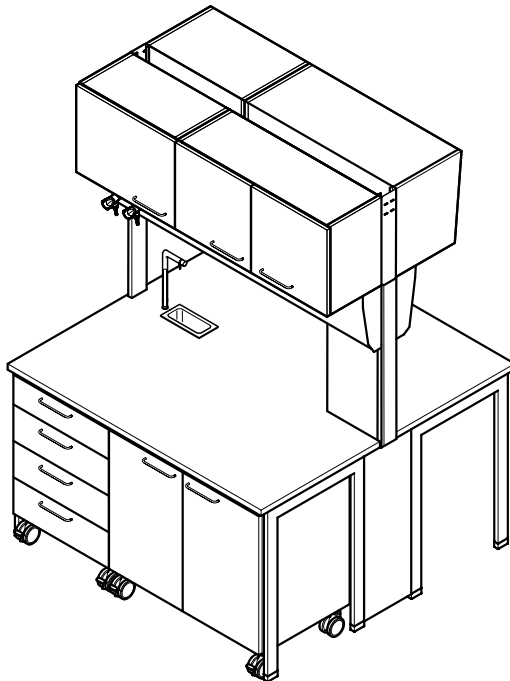

**Medientischaufsatz mit Hängeschränken,
Ständerverlängerung und Unterbauten auf Sockel**

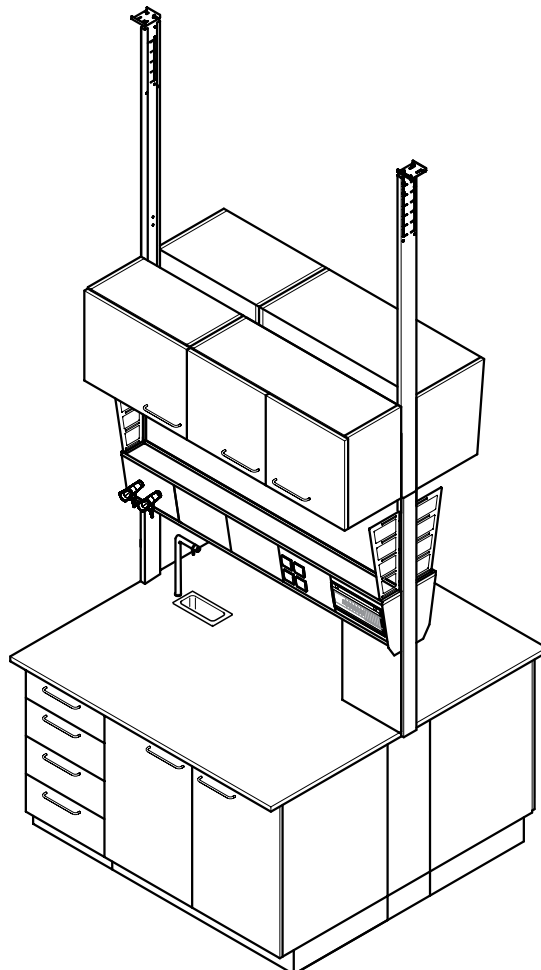

XPRESS

Medientischaufsatz

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	310				
Höhe [mm]	1602				
Höhe Durchgriff bei Arbeitshöhe 900 mm [mm]	450				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (für Hängeschränk Höhe 460 mm)	462				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (für Hängeschränk Höhe 760 mm)	762				
Höhe Ständerverlängerung [mm] (bis Deckenhöhe 3500 mm)	Abhängig von Deckenhöhe				
Medienpanel Breite x Höhe [mm]	300 x 200				
Ablage aus Glas Breite x Tiefe [mm]	Breite Tischaufsatz x 150				
Ablage aus beschichteter OSB-Platte Breite x Tiefe [mm]	Breite Tischaufsatz x 300				

Tragkraft	
Ablage aus Glas [kg]	20
Ablage aus beschichteter OSB-Platte [kg]	30
Maximale Tragkraft pro Stativhalter mit Stativstab Länge 300 mm [kg]	5

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Doppelseitiger Medienkanal als Tischaufsatz mit Durchgriff oberhalb der Arbeitsplatte
Anzahl Medienpanels	Abhängig von Kanalbreite
Stativhalter ø [mm]	12 bis 13

Material	
Ablage Medientischaufsatz	Vollkern 5 mm

Elektrotechnik	
Elektroversorgung	Steckdosen in Medienpanel
Elektroabsicherung	Optional

Sanitärtechnik	
Sanitärversorgung	Medienpanel mit Entnahmearmaturen für Vakuum, Gase und/oder Wasser Versorgungsleitungen im Tischaufsatz


XPRESS

Tisch mit H-Fuß-Tischgestell

Verwendungszweck

- Tischgestell mit Arbeitsplatte aus unterschiedlichen Materialien als Arbeits- und Ablagefläche für Laborarbeiten
- Tragstruktur für Analysegeräte und Aufbauten

Aufbau

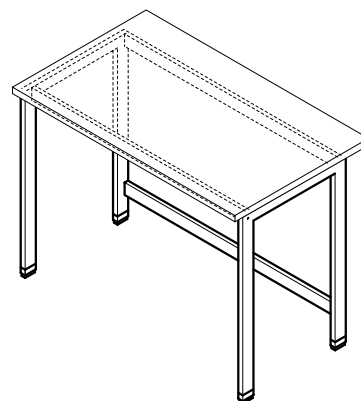

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	600 750 900				
Arbeitshöhe [mm]	750 900				
Tragkraft					
H-Fuß-Tischgestell [kg]	200 (zur Wandmontage oder zur Montage an einer Medienzelle)				
Ausführungsmerkmale					
Konstruktion	Für eingehängte Unterbauten, nicht gestellübergreifend verschiebbar Für rollbare Unterbauten				
Nivellierfüße	Einzeln einstellbar				
Material					
Tischgestell	Stahlprofil 60/25/2 mm				
Arbeitsplatte	Je nach Anforderung				
Nivellierfüße	Kunststoffgehäuse mit Stahlspindel				


XPRESS

Tisch mit C-Fuß-Tischgestell

Verwendungszweck

- Tischgestell mit Arbeitsplatte aus unterschiedlichen Materialien als Arbeits- und Ablagefläche für Laborarbeiten
- Tragstruktur für Analysegeräte und Aufbauten

Aufbau

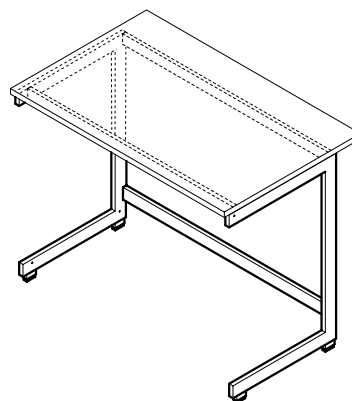

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600	900	1200	1500	1800
Tiefe [mm]	600 750 900				
Arbeitshöhe [mm]	750 900				

Tragkraft	
C-Fuß-Tischgestell [kg]	200

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Für eingehängte Unterbauten, gestellübergreifend verschiebbar Für rollbare Unterbauten
Nivellierfüße	Einzel einstellbar


Material	
Tischgestell	Stahlprofil 70/25/3 mm
Arbeitsplatte	Je nach Anforderung
Nivellierfüße	Kunststoffgehäuse mit Stahlspindel

XPRESS Rolltisch

Verwendungszweck

- Rollbares Tischgestell mit Arbeitsplatte aus unterschiedlichen Materialien als Arbeits- und Ablagefläche für Laborarbeiten
- Rollbare Tragstruktur für Analysegeräte und Aufbauten

Aufbau

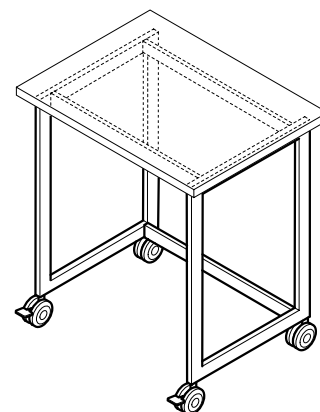

Technische Daten

Abmessungen			
Breite [mm]	900	1200	1500
Tiefe [mm]	600 750 900		
Arbeitshöhe [mm]	750 900		

Tragkraft	
Rolltisch [kg]	150
Je Schwerlastrolle [kg]	110

Ausführungsmerkmale	
Schwerlastrollen	4, davon 2 arretierbar (Rolle und Lenkachse arretierbar)
Fachboden	Optional
Unterbau	Optional


Material	
Tischgestell	Stahlprofil 60/25/2 mm
Arbeitsplatte	Je nach Anforderung

XPRESS Höhenverstellbarer Tisch

Verwendungszweck

- Tischgestell mit Arbeitsplatte aus unterschiedlichen Materialien als höhenverstellbare Arbeits- und Ablagefläche für Laborarbeiten
- Tragstruktur für Analysegeräte und Aufbauten

Aufbau

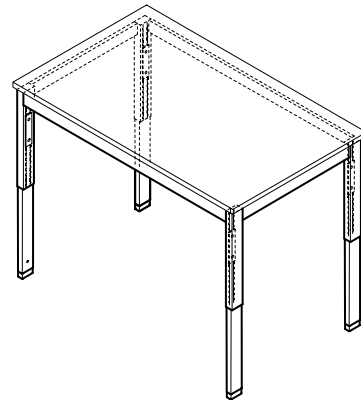

Technische Daten

Abmessungen		
Breite [mm]	1200	1500
Tiefe [mm]	750	900
Arbeitshöhe [mm]	700 - 950	

Material	
Tischgestell	Stahlprofil 60/25/2 mm
Arbeitsplatte	Je nach Anforderung
Nivellierfüße	Kunststoffgehäuse mit Stahlspindel

Tragkraft	
Gesamt [kg]	200

Ausführungsmerkmale	
Arbeitshöhe	Verstellbar im Raster von 25 mm
Tischgestell	H-Fuß-Tischgestell

XPRESS

Material der Arbeitsplatten

Melaminharz-Beschichtung	
Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren Salpetersäure Erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Eben
Einschränkung	Feuchtigkeitsempfindliche Stoßstellen Mittlere chemische Beständigkeit
Einsatz	Roll-, Anstell-, Fensterarbeitstische Geräte- und Labortische im Trockenbereich Nicht im Feucht- oder Nassbereich einsetzbar
Gewicht [kg/m ²]	19,6
Gesamtdicke [mm]	30
	Hellgrau NCS S 3005 R80B

Polypropylen	
Kritische Stoffe	Kohlenwasserstoff Zitronensäure Oxalsäure Tetrachlorkohlenstoff Dieselöl
Zerstörende Stoffe	Ozon Konzentrierte Salpetersäure Chloroform Benzin Benzol
Vorteil	Fugenlos Eben Leicht Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren und viele Lösemittel Leicht zu entsorgen Geringerer Glasbruch
Einschränkung	Weiche, kratzempfindliche Oberfläche Hitzeempfindlich
Einsatz	Bereiche mit hoher Chemikalienbeständigkeit Arbeiten mit Flusssäure Radionuklidbereich Bereiche, in denen es auf Fugenlosigkeit ankommt
Gewicht [kg/m ²]	20,3
Gesamtdicke [mm]	30
Wulstrand [mm]	7
	Hellgrau NCS S 3005 R80B

XPRESS

Material der Arbeitsplatten

Vollkern	
Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren Salpetersäure Erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Feuchtigkeitsbeständig Eben Leicht zu entsorgen
Einschränkung	Geringe Beschichtungsdicke
Einsatz	Feuchtraum Physikalische Laboratorien Tische mit mittlerer Beanspruchung
Gewicht [kg/m²]	26,4
Gesamtdicke [mm]	19
Wulstrand (Option) [mm]	7
	Hellgrau NCS S 3005 R80B

Vollkern mit EBC-Oberfläche	
Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren Salpetersäure Erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Antibakteriell Elektronenstrahl gehärtete Oberfläche (Electron Beam Curing EBC) Hohe chemische Beständigkeit Feuchtigkeitsbeständig Eben Leicht zu entsorgen
Einschränkung	Geringe Beschichtungsdicke
Einsatz	Chemische, mikrobiologische, gentechnische Laboratorien
Gewicht [kg/m²]	26,4
Gesamtdicke [mm]	20
Wulstrand (Option) [mm]	7
	Grau Ähnlich NCS S 3000 N

XPRESS

Material der Arbeitsplatten

Epoxy	
Kritische Stoffe	Verschiedene Lösemittel Verdünnte Säuren
Zerstörende Stoffe	Flusssäure Konzentrierte erhitzte Mineralsäuren
Vorteil	Fugenlos Eben Massive Platte Hohe mechanische Beanspruchbarkeit Leicht zu entsorgen
Einschränkung	Kratzempfindliche Oberfläche Empfindlich gegen konzentrierte Säuren
Einsatz	Laborarbeitsplatz aller Art
Gewicht [kg/m²]	32
Gesamtdicke [mm]	19
Wulstrand [mm]	7
	Platingrau Ähnlich NCS S 4202-R


Glas	
Kritische Stoffe	Keine
Zerstörende Stoffe	Flusssäure
Vorteil	Eben Hohe chemische Beständigkeit
Einschränkung	Stoßempfindlich an Ecken und Kanten
Einsatz	Labortische aller Art mit höchster chemischer Beanspruchung
Gewicht [kg/m²]	38
Gesamtdicke [mm]	30
	Hellgrün NCS S 2010 G10Y


! Tischplatten in Epoxy und Glas sind nur im 10-Wochen-Programm möglich!


! Glastischplatten sind nur im Raster 1.200 / 1.500 / 1.800 mm und ohne Ausschnitte möglich!


XPRESS

Material der Arbeitsplatten

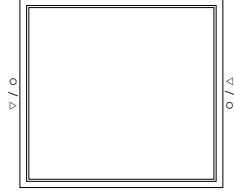4-seitiger Wulstrand Umlaufend	Anwendung	Tiefe [mm]	Breite 1200 [mm]	Breite 1500 [mm]	Breite 1800 [mm]	
 ▷ Schnittkante ○ Glasiert	Arbeitstisch ohne Zelle 750	748	✓	×	×	
	Arbeitstisch ohne Zelle 900	898	✓	×	×	
	Arbeitstisch mit Zelle 750	672	×	×	✓	
	Arbeitstisch mit Zelle 900	822	✓	✓	✓	
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1500	702	×	×	×	
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1800	852	✓	✓	✓	
✓ verfügbar × nicht verfügbar						

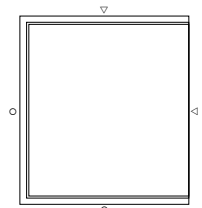3-seitiger Wulstrand Vorne, links und hinten	Anwendung	Tiefe [mm]	Breite 898 [mm]	Breite 1198 [mm]	Breite 1498 [mm]	Breite 1798 [mm]
 ▷ Schnittkante ○ Glasiert	Arbeitstisch ohne Zelle 750	745	×	×	✓	✓
	Arbeitstisch ohne Zelle 900	895	✓	✓	✓	✓
	Arbeitstisch mit Zelle 750	672	✓	✓	✓	✓
	Arbeitstisch mit Zelle 900	822	✓	✓	✓	✓
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1500	702	✓	✓	✓	✓
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1800	852	✓	✓	✓	✓
✓ verfügbar × nicht verfügbar						

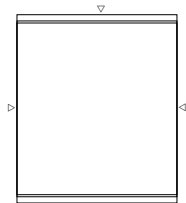2-seitiger Wulstrand Vorne und hinten	Anwendung	Tiefe [mm]	Breite 895 [mm]	Breite 1195 [mm]	Breite 1495 [mm]	Breite 1795 [mm]
 ▷ Schnittkante ○ Glasiert	Arbeitstisch ohne Zelle 750	745	✓	✓	✓	×
	Arbeitstisch ohne Zelle 900	895	✓	✓	✓	×
	Arbeitstisch mit Zelle 750	672	×	✓	×	×
	Arbeitstisch mit Zelle 900	822	✓	✓	✓	✓
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1500	702	✓	✓	✓	×
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1800	852	✓	✓	✓	✓
✓ verfügbar × nicht verfügbar						

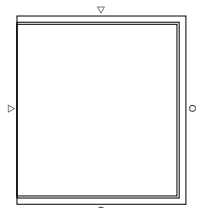3-seitiger Wulstrand Vorne, rechts und hinten	Anwendung	Tiefe [mm]	Breite 898 [mm]	Breite 1198 [mm]	Breite 1498 [mm]	Breite 1798 [mm]
 ▷ Schnittkante ○ Glasiert	Arbeitstisch ohne Zelle 750	745	×	×	✓	✓
	Arbeitstisch ohne Zelle 900	895	✓	✓	✓	✓
	Arbeitstisch mit Zelle 750	672	✓	✓	✓	✓
	Arbeitstisch mit Zelle 900	822	✓	✓	✓	✓
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1500	702	✓	✓	✓	✓
	Doppelarbeitstisch mit Zelle 1800	852	✓	✓	✓	✓
✓ verfügbar × nicht verfügbar						


! Keine Ausschnitte in Steinzeugtischplatten möglich!

Verwendungszweck

- Ver- und Entsorgung von Wasser
- Zur Reinigung von Betriebsmitteln
- Zur Aufnahme größerer Wassermengen
- Nicht geeignet für die Entsorgung von Chemikalien

Aufbau

- 1 Unterbau
- 2 Spülbecken
- 3 Armatur

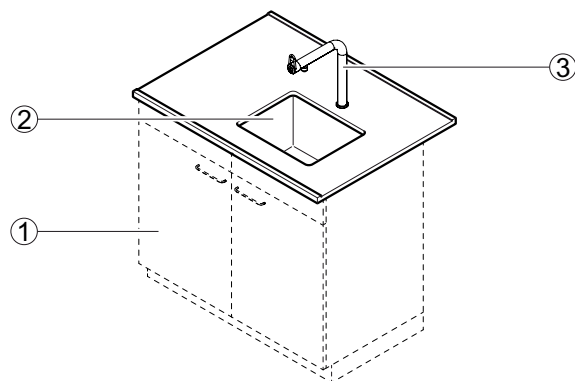

Technische Daten

Arbeitsplatte	Melaminharz-Beschichtung, Vollkern, Vollkern mit EBC-Oberfläche, Polypropylen					
Material Spülbecken	Polypropylen					
Beckenmaße	380 x 380 x 250					
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	530 x 380 x 250					
	680 x 380 x 250					
Einbauart	Becken mit Wulstrand von oben in Arbeitsplatte eingesetzt					
Breite Arbeitsplatte [mm]	600	900	1200	1500	1800	
Tiefe Arbeitsplatte [mm]	600					
	675					
	705					
	750					
	825					
	855					
	900					
Arbeitshöhe [mm]	900					


Arbeitsplatte	Steinzeug					
Material Spülbecken	Steinzeug					
Beckenmaße	380 x 380 x 250					
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	530 x 380 x 250					
	680 x 380 x 250					
Einbauart	Becken flächenbündig in Arbeitsplatte eingebaut					
Breite Arbeitsplatte [mm]	1200					
Tiefe Arbeitsplatte [mm]	600 ¹⁾					
	675 ¹⁾					
	705 ¹⁾					
	750					
	825					
	855					
	900					
Arbeitshöhe [mm]	900					
Mögliche Armaturenpositionen	¹⁾ Platzierung ggf. seitlich neben dem Spülbecken Anzahl 1, (C), 2 (B+D), 3 (A+C+E)					
Standards	vordefinierte Standards möglich					

Verwendungszweck

- Ver- und Entsorgung von Wasser
- Zur Reinigung von Betriebsmitteln
- Zur Aufnahme größerer Wassermengen
- Nicht geeignet für die Entsorgung von Chemikalien



Aufbau

- 1 Unterbau
2 Spülbecken
3 Armatur

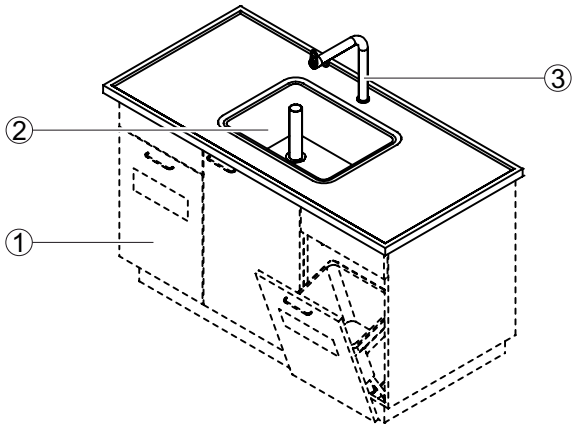

Technische Daten

Arbeitsplatte	Melaminharz-Beschichtung, Vollkern, Vollkern mit EBC-Oberfläche, Polypropylen	
Material Spülbecken	Polypropylen	
Beckenmaße Breite x Tiefe x Höhe [mm]	380 x 380 x 250 530 x 380 x 250 680 x 380 x 250	
Einbauart	Becken mit Wulstrand von oben in Arbeitsplatte eingesetzt	
Breite Arbeitsplatte [mm]	1500	1800
Tiefe Arbeitsplatte [mm]	740	
Arbeitshöhe [mm]	900	

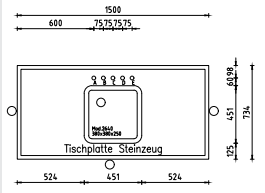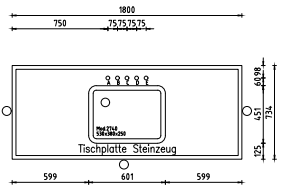Arbeitsplatte	Steinzeug
Material Spülbecken	Steinzeug
Beckenmaße Breite x Tiefe x Höhe [mm]	380 x 380 x 250 530 x 380 x 250 680 x 380 x 250
Einbauart	Becken flächenbündig in Arbeitsplatte eingebaut
Breite Arbeitsplatte [mm]	1500 1800
Tiefe Arbeitsplatte [mm]	740
Arbeitshöhe [mm]	900
Mögliche Armaturenpositionen	¹⁾ Platzierung ggf. seitlich neben dem Spülbecken Anzahl 1, (C), 2 (B+D), 3 (A+C+E)  
Standards	vordefinierte Standards möglich


XPRESS

Beckenmodul an Medienzelle

Verwendungszweck

- Ver- und Entsorgung von Wasser
- Zur Reinigung von Betriebsmitteln
- Beckenmodul unter Wasserarmaturen zur Aufnahme geringer Wassermengen
- Nicht geeignet für die Entsorgung von Chemikalien

Aufbau

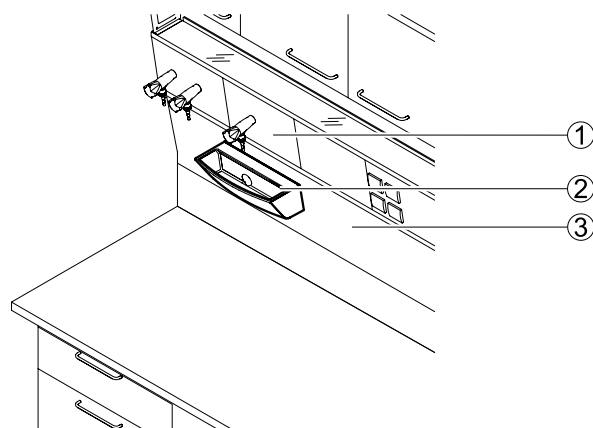

- 1 Medienpanel mit Eckventilen
 2 Beckenmodul
 3 Frontblende für Medienzelle

Technische Daten

Abmessungen	Polypropylen
Breite [mm]	294
Tiefe [mm]	132
Höhe [mm]	112
Beckeninnenmaß Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Ca. 280 x 93 x 93

Material	
Beckenmodul	Polypropylen


Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Befestigung an Frontblende der Medienzelle

Sanitärtechnik	
Wasseranschluss	Festanschluss
Abwasseranschluss	Festanschluss mit Siphon
Wasserarmatur	Zellenarmaturen optional

Verwendungszweck

- Zum Aufstellen von Analysewaagen und anderen empfindlichen Messgeräten
- Tischgestell mit Arbeitsplatte und besonders gelagerter, schwingungsfreier Platte

Aufbau

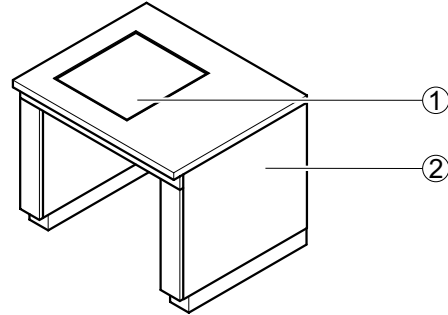

- 1 Wägeplatte aus Feinbeton
2 Tischumkleidung

Technische Daten


Abmessungen	
Breite [mm]	900
Tiefe [mm]	750 900
Arbeitshöhe [mm]	750 900
Breite x Tiefe [mm] Wägeplatte	400 x 450
Material	
Tragkonstruktion	Stahlprofil
Arbeitsplatte	Melamin Vollkern Vollkern mit EBC-Oberfläche
Wägeplatte	Feinbeton
Gewicht	
Gesamtgewicht [kg]	120
Wägeplatte [kg]	65
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Besonders gelagerte, schwere Wägeplatte aus Feinbeton Tragkonstruktion der Wägeplatte schwingungsentkoppelt

! Mögliches Material der Stauräume in XPRESS: Standard Melamin und Vollkern!

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Für Arbeitshöhen 750 mm und 900 mm
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Varianten

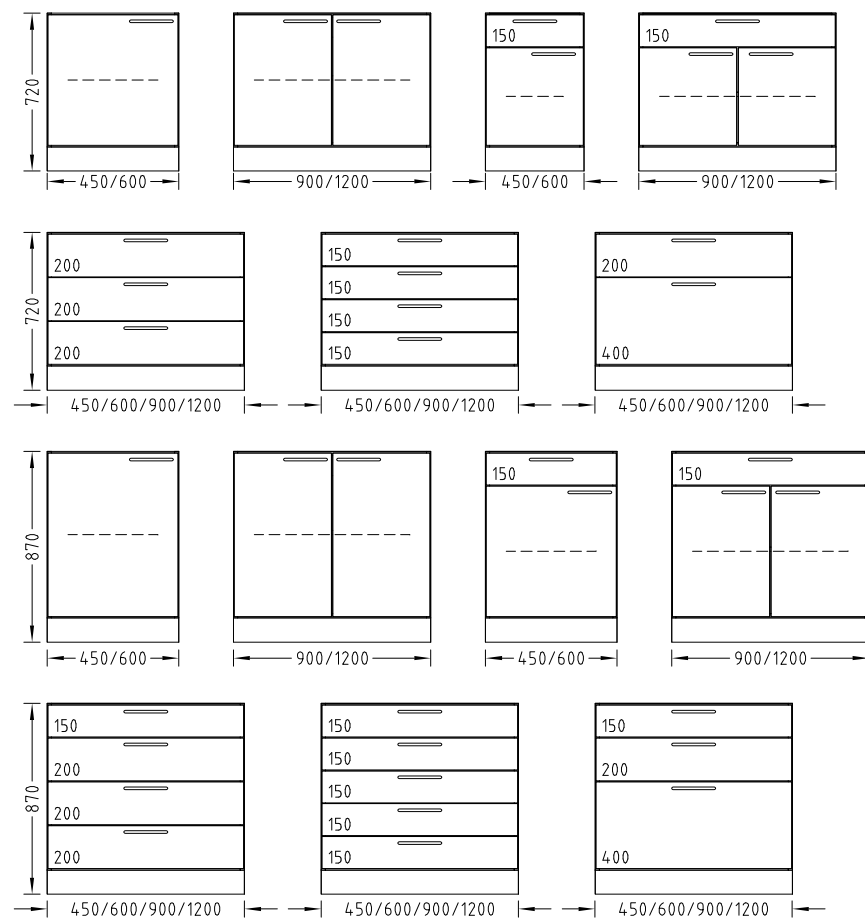

Technische Daten

Abmessungen				
Breite [mm]	450	600	900	1200
Tiefe [mm]	550			
Gesamthöhe [mm]	720 870			
Höhe Schubkästen [mm]	150 200 400 Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten			
Höhe Sockel [mm]	110			

Tragkraft	
Je Fachboden/Schubkasten [kg]	30

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Für Arbeitshöhe 750 und 900 mm Flügeltüren mit 270°-Scharnieren Schubkästen mit Vollauszug Oben offen, Rückwand herausnehmbar Fachboden, höhenverstellbar 4 Nivellierfüße
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl
Hochauszüge	Optional
Einzugsdämpfer für Schubkasten	Standard
Abluftanschluss	Optional
Schließung	Optional


XPRESS

Unterbau auf Rollen

Verwendungszweck

- Zur flexiblen Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Für Arbeitshöhen 750 mm und 900 mm
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Varianten

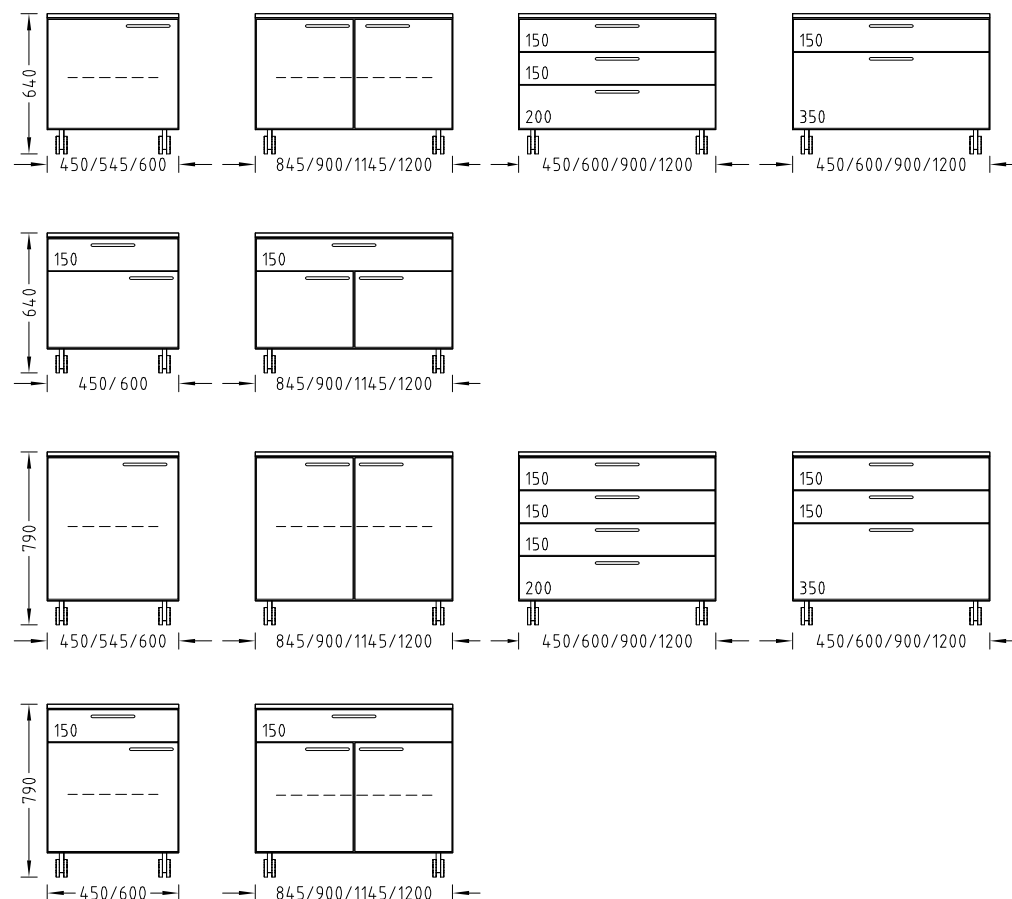

Technische Daten

Abmessungen							
Breite [mm]	450	545	600	845	900	1145	1200
Tiefe [mm]	550						
Gesamthöhe [mm]	640 790						
Höhe Schubkästen [mm]	150 200 350 Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten						
Höhe Rollen [mm]	110						

Tragkraft	
Je Fachboden/Schubkasten [kg]	30
Je Rolle [kg]	70

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Für Arbeitshöhe 750 und 900 mm Flügeltüren mit 270°-Scharnieren Schubkästen mit Vollauszug und Wechselauszugssperre Fachboden, höhenverstellbar Oben abgedeckt, Rückwand mit Korpus fest verbunden 4 Lenkrollen, vordere Rollen arretierbar
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl
Einzugsdämpfer für Schubkasten	Standard
Schließung	Optional
Schubkästen mit Wechselauszugssperre	Standard




XPRESS

Eingehängter Unterbau

Verwendungszweck

- Zur flexiblen Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Für Arbeitshöhen 750 mm und 900 mm
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Varianten

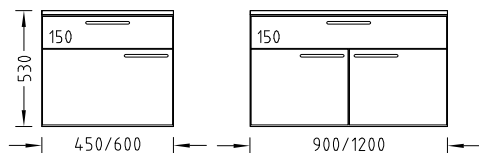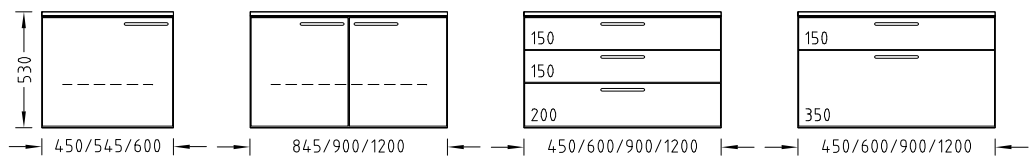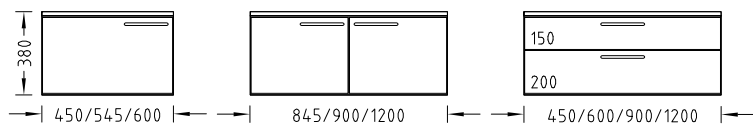

Technische Daten

Abmessungen							
Breite [mm]	450	545	600	845	900	1145	1200
Tiefe [mm]	500 (Gestelltiefe 572) 550 (Gestelltiefe 672)						
Höhe [mm]	380 530						
Höhe Schubkästen [mm]	150 200 350 Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten						
Tragkraft							
Je Fachboden/Schubkasten [kg]	30						
Ausführungsmerkmale							
Konstruktion	Für Arbeitshöhe 750 und 900 mm 2 Beschläge zum Einhängen in die Profilschiene des Tischgestells Flügeltüren mit 270°-Scharnieren Schubkästen mit Vollauszug Oben abgedeckt, Rückwand mit Korpus fest verbunden Fachboden, höhenverstellbar Bei C-Fuß-Tischgestell über das Tischraster hinaus seitlich verschiebbar Flügeltür(en) mit 1 Fachboden bei Höhe 530 mm						
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten						
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl						
Einzugsdämpfer für Schubkästen	Standard						
Schließung	Optional						


XPRESS

Eingeschobener Unterbau für Abzüge

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Für Abzüge mit Rückwand- und Seiteninstallation auf Stahlgestell
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Varianten

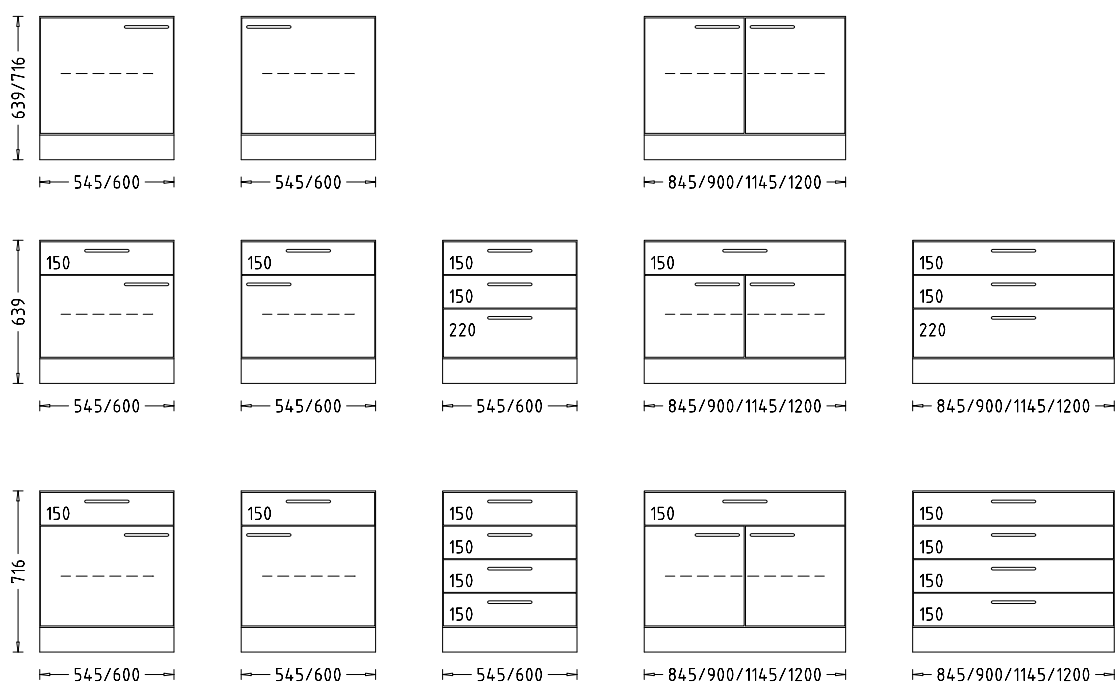

XPRESS

Eingeschobener Unterbau für Abzüge

4

Stauräume

Technische Daten

Abmessungen						
Breite [mm]	545	600	845	900	1145	1200
Tiefe [mm]	550					
Gesamthöhe [mm] eingeschobener Unterbau für Tischabzüge mit Rückwandinstallation	640					
Gesamthöhe [mm] eingeschobener Unterbau für Tischabzüge mit Seiteninstallation	716					
Höhe Sockel [mm]	110					
Höhe Schubkästen [mm]	150 220 Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten					

Tragkraft	
Je Fachboden [kg]	30

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Flügeltüren mit 270°-Scharnieren Schubkästen mit Vollauszug Oben geschlossen, Rückwand herausnehmbar Fachboden, höhenverstellbar 4 Nivellierfüße
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl
Abluftanschluss	Optional
Schließung	Optional


XPRESS Unterbau für Spülen

Verwendungszweck


- Als Unterbau für Spülen zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

Spüle mit Unterbau für Medienzellen oder vor der Wand

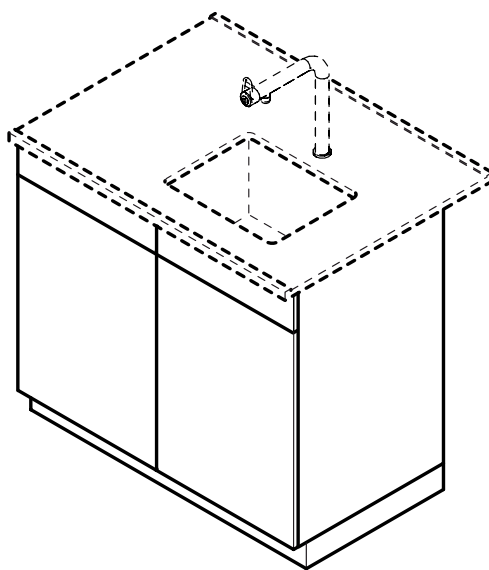


Stirrspüle für Doppelarbeitsstische

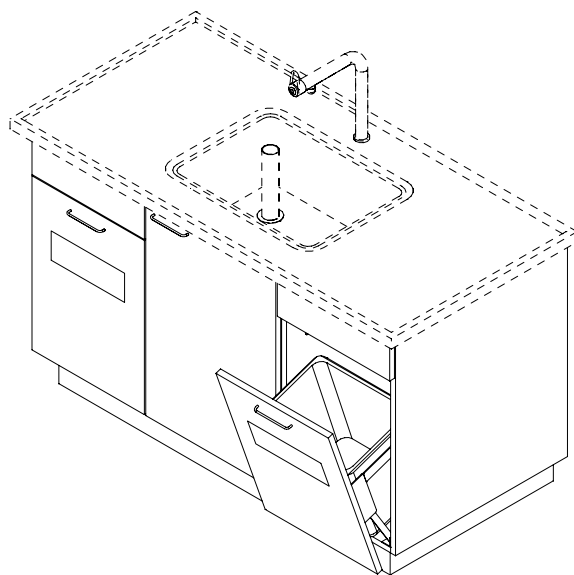


Varianten

Spüle mit Unterbau für Medienzellen oder vor der Wand

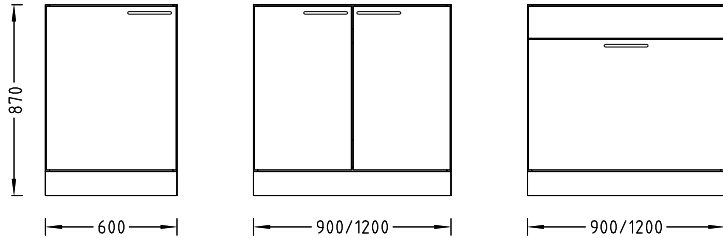

Stirrspüle für Doppelarbeitsfläche

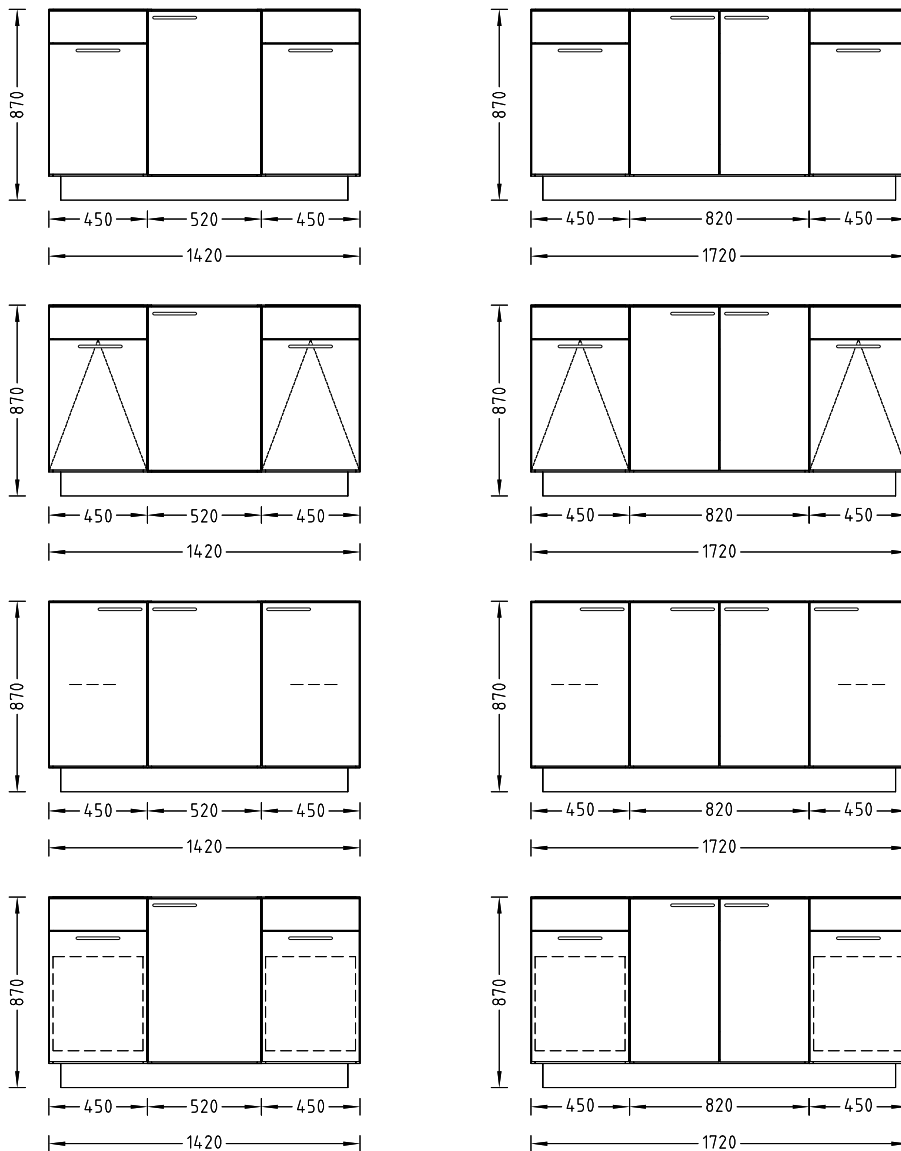

XPRESS

Unterbau für Spülen

Technische Daten

Abmessungen					
Breite [mm]	600 ¹⁾	900 ¹⁾	1200 ¹⁾	1420 ²⁾	1720 ²⁾
Tiefe [mm]	550			700	
Gesamthöhe [mm]	870				
Höhe Sockel [mm]	110				

¹⁾ Für Spülen an Medienzellen oder vor der Wand

²⁾ Für Stirnspülen


Tragkraft	
Je Fachboden/Schubkasten [kg]	30

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Flügeltüren mit 270°-Scharnieren 4 Nivellierfüße Kipptür geneigt mit Abfallbox 30 l Abfallbox mit 2 x 15 l mit Hochauszug Abfallbox mit 2 x 35 l mit Hochauszug Flügeltür(en), Hochauszug Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl
Schließung	Optional




Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

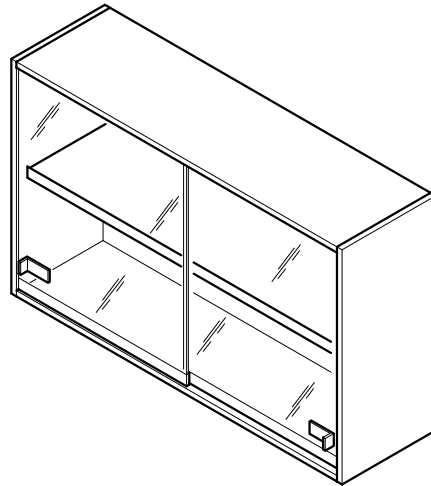

Varianten

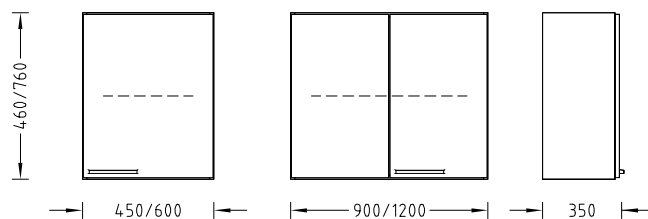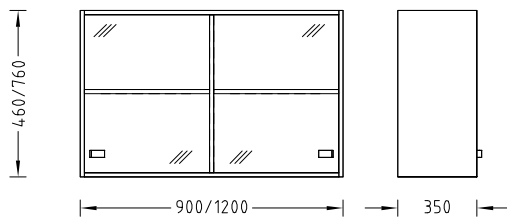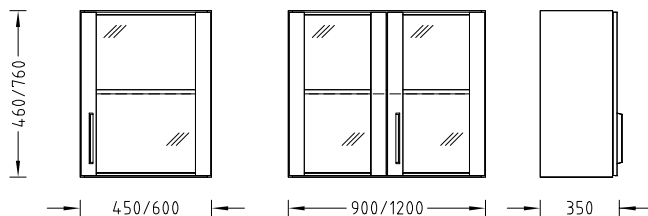

XPRESS

Hängeschränk

Technische Daten

Abmessungen				
Breite [mm]	450	600	900	1200
Tiefe [mm]	350			
Höhe [mm]	460 760			


Tragkraft	
Je Fachboden [kg]	30
Tragkraft gesamt [kg]	60

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Nivellierbeschlag zur Befestigung an der Wand oder an der Medienzelle Bei Breite 1200 mm mit Mittelseite Fachboden, höhenverstellbar
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Griff	Bügelgriff SCALA Bügelgriff Edelstahl Bei Glasschiebetür aufgeklebter Kunststoffgriff
Schließung	Optional

Verwendungszweck


- Zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

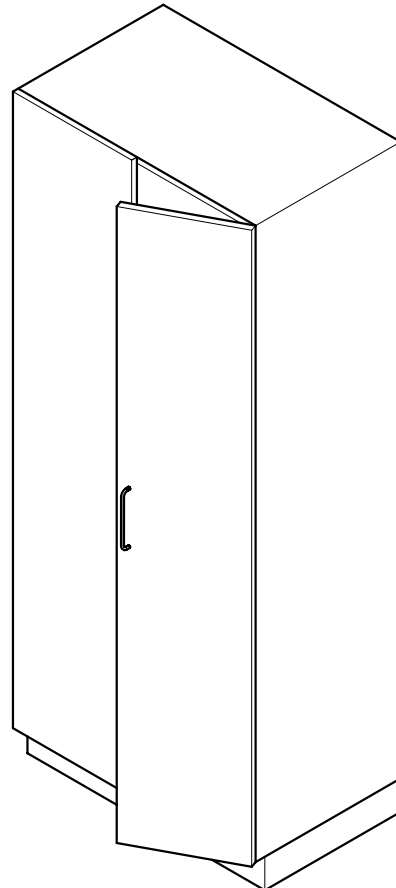


XPRESS Laborschrank


Varianten

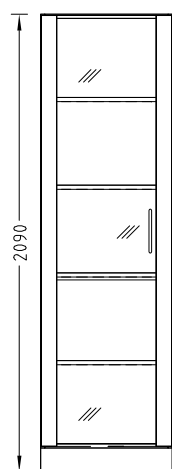


450/600

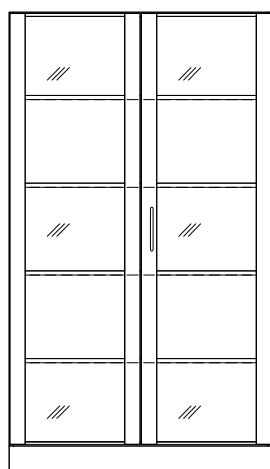


900/1200

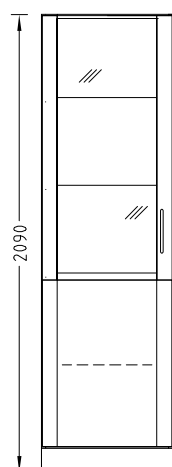


450/600

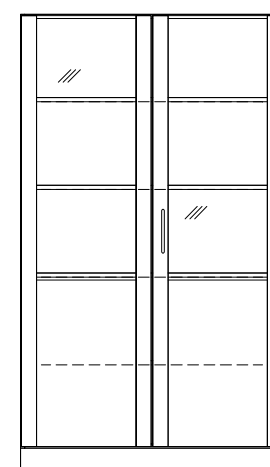


900/1200

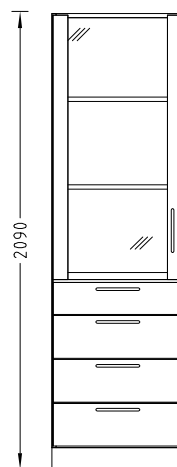


600

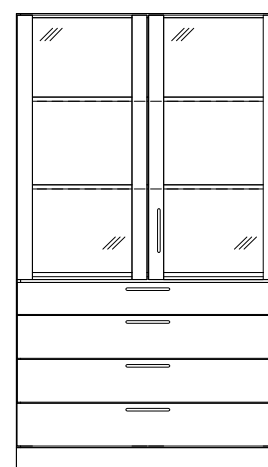


900/1200

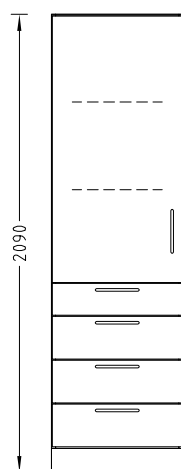


600

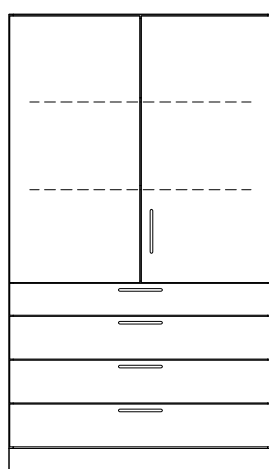

900/1200

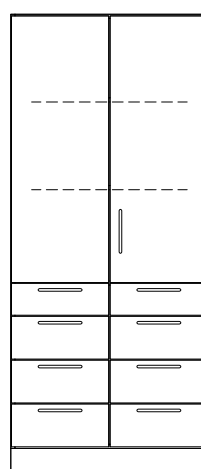

900/1200

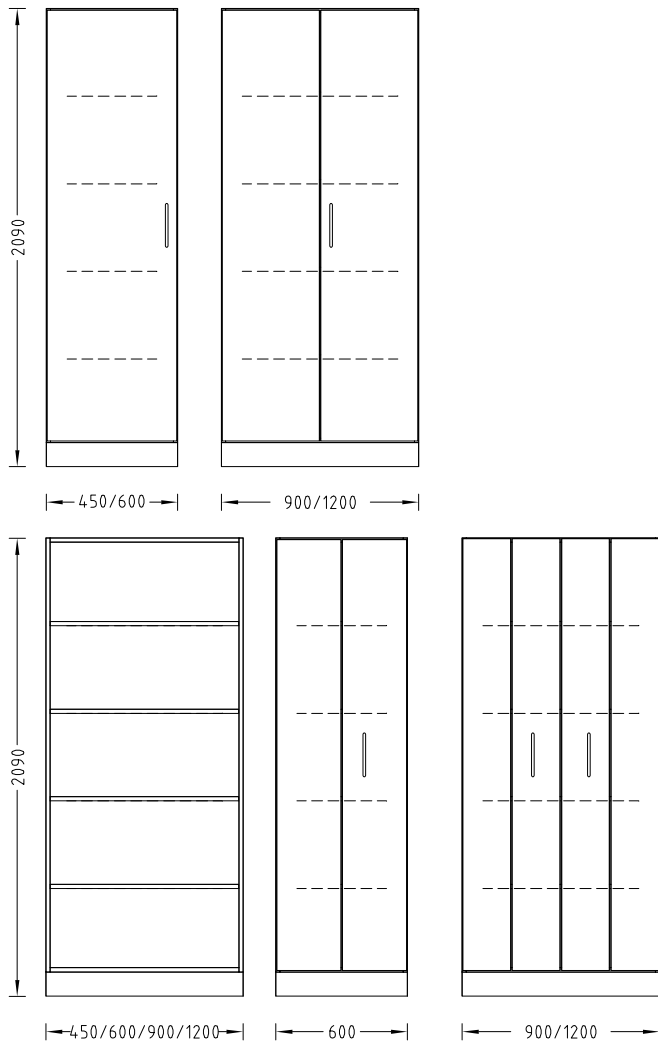

Technische Daten

Abmessungen				
Breite [mm]	450	600	900	1200
Tiefe [mm]			350	550
Gesamthöhe [mm]			2090	
Höhe Sockel [mm]			110	


Tragkraft	
Je Fachboden [kg]	30

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Flügeltüren mit 270°-Scharnieren Fachböden, höhenverstellbar Schubkästen mit Vollauszug 4 Nivellierfüße
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten Schubkästen nur bei Tiefe 550 mm
Griff	Bügelgriff SCALA Bügelgriff Edelstahl
Fachböden, ausziehbar	Optional (bei Schranktiefe 550 mm)
Schubkästen	Optional (bei Schranktiefe 550 mm)
Einzugsdämpfer für Schubkasten	Standard
Abluftanschluss	Optional
Schließung	Optional

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Schutz- und Rettungsmaterialien (Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer usw.)
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

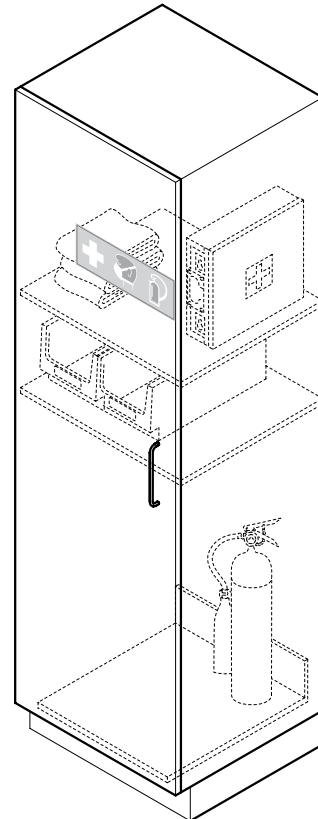

Technische Daten


Abmessungen	
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	350 550
Gesamthöhe [mm]	2090
Höhe Sockel [mm]	110
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Flügeltür mit 270°-Scharnieren 4 Fachböden, höhenverstellbar 4 Nivellierfüße
Ausstattung	Erste-Hilfe-Koffer Feuerlöscher, 5 kg Sandkisten Sandschaufel Löschdecken

XPRESS Aufsatzschrank

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Geräten und Chemikalien, gemäß EN 14727
- Ausschließlich geeignet als fest montierter Aufsatz für folgende Schränke von Waldner: Laborschrank, Auszugsschrank, Soforthilfeschrank sowie Säure- und Laugenschrank
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

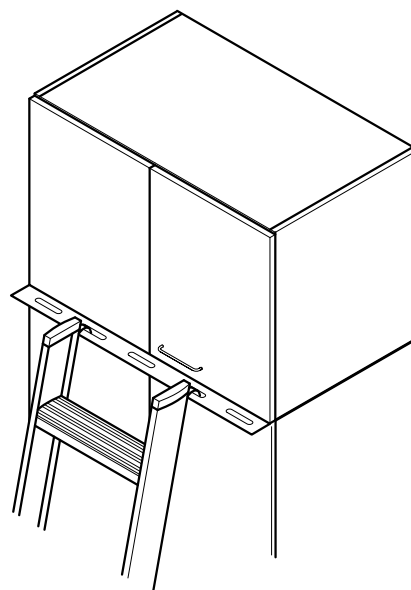

Technische Daten

Abmessungen				
Breite [mm]	450	600	900	1200
Tiefe [mm]			350 550	
Höhe [mm]			610 760	


Tragkraft	
Je Fachboden [kg]	30

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Mit Schiene zum Einhängen einer Leiter Für Laborschränke mit oder ohne Abluftanschluss 1 Fachboden, höhenverstellbar Flügeltür(en)
Griff	Bügelgriff SCALA Bügelgriff Edelstahl
Einhängeleiter	Optional
Schließung	Optional

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von flüssigen oder festen Stoffen in geeigneten Behältern, gemäß EN 14727
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

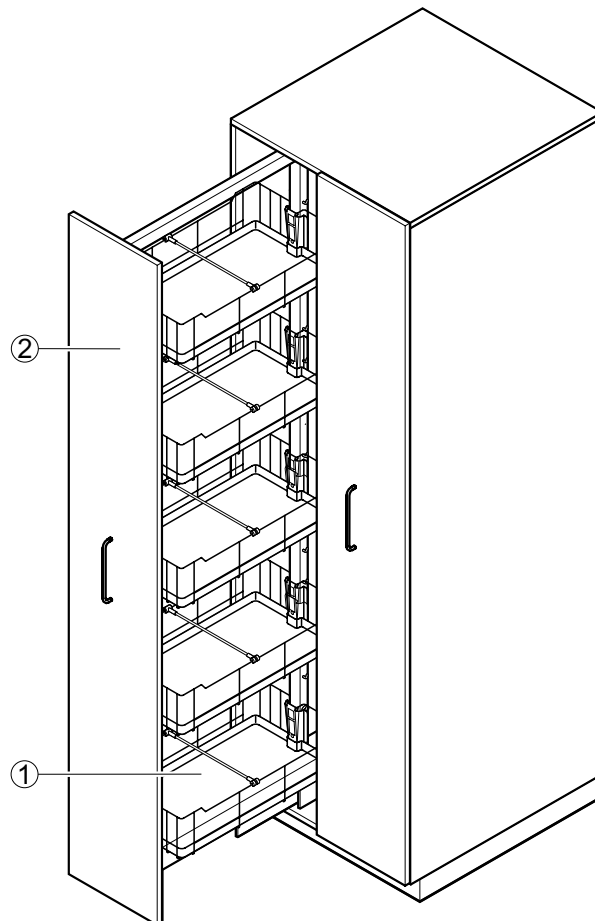

- 1 Drahtkorb mit Auffangwanne
2 Auszug

XPRESS

Auszugsschrank

Technische Daten

Abmessungen		
Breite [mm]	600	900
Tiefe [mm]	550	
Gesamthöhe [mm]	2090	
Höhe Sockel [mm]	110	
Auffangwanne Breite x Tiefe x Höhe [mm]	240 x 425 x 40	

Tragkraft	
Je Auszug [kg]	120
Je Wanne [kg]	10

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Pro Auszug 5 Drahtkörbe mit Auffangwannen, höhenverstellbar Befestigung an Wand 4 Nivellierfüße Auszugstüren mit beidseitig zugänglichen Auszügen
Griff	Bügelgriff SCALA Bügelgriff Edelstahl
Einzugsdämpfer	Optional
Fachteiler	Optional
Abluftanschluss	Optional
Schließung	Optional


Material	
Auffangwanne	Polyethylen

XPRESS Laborschrank zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung begrenzter Mengen von Säuren und Laugen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen

Aufbau

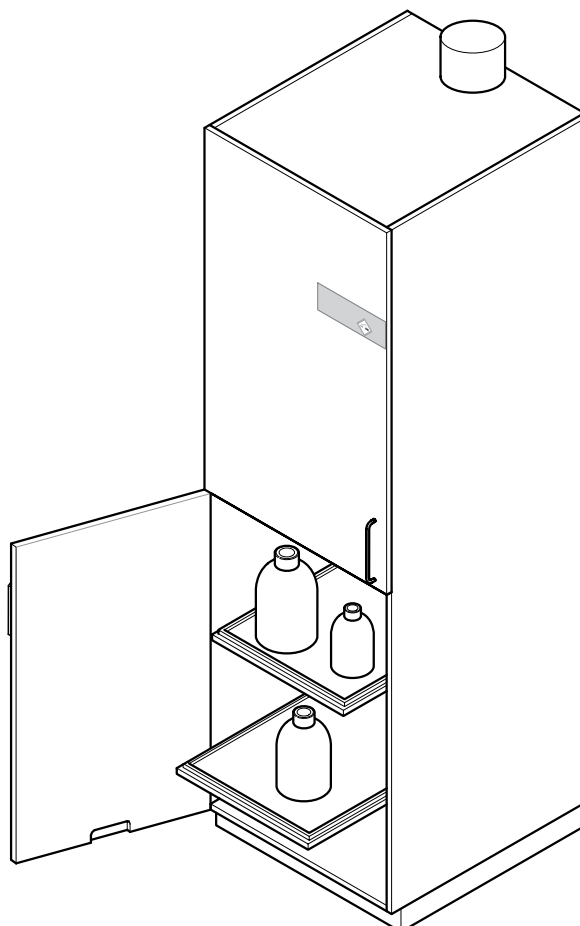

Stauräume

XPRESS

Laborschrank zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Technische Daten


Abmessungen	
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	550
Gesamthöhe [mm]	2090
Höhe Sockel [mm]	110
Tragkraft	
Höhenverstellbarer Fachboden [kg]	30
Ausziehbarer Fachboden [kg]	20
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Anschluss an permanent wirkendes Entlüftungssystem 4 Fachböden, fest oder ausziehbar 4 Nivellierfüße Für Säuren und Laugen getrennte Abteile Auffangwannen aus Polypropylen Beschichtete Beschläge Flügeltür(en)
Griff	Bügelgriff SCALA Bügelgriff Edelstahl
Lufttechnische Daten	
Volumenstrom [m³/h]	100
Lüftungsanschluss Ø [mm]	90
Anschlusshöhe Abluftstutzen [mm]	2176

Sicherheitsunterbau zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Verwendungszweck


- Eingeschobener oder selbsttragender Unterbau für Tischabzüge zur Aufbewahrung begrenzter Mengen von Säuren und Laugen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen

Aufbau

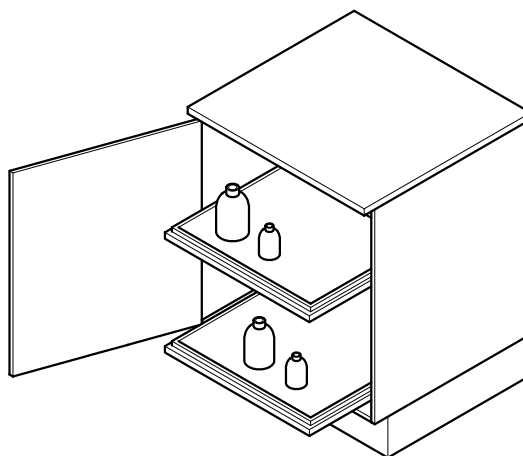


Varianten

Eingeschobene Unterbauten für Abzüge

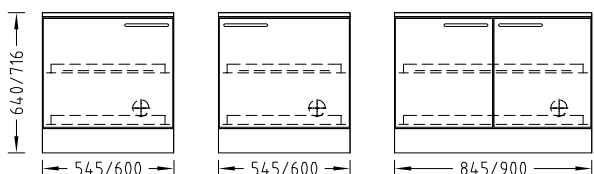

Tragende Unterbauten für Tische

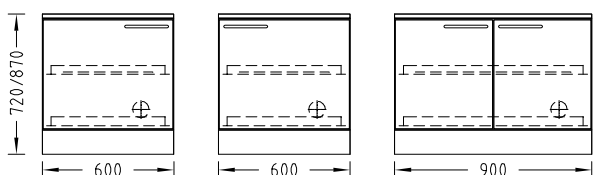

XPRESS

Sicherheitsunterbau zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Technische Daten

Abmessungen		
Breite [mm]	600	900
Breite für eingeschobene Unterbauten [mm]	545/600/845/900	
Tiefe [mm]	550/650	
Gesamthöhe [mm] selbsttragende Unterbauten für Tische	720/870	
Gesamthöhe [mm] eingeschobene Unterbauten für Tischabzüge mit Rückwandinstallation	640	
Gesamthöhe [mm] eingeschobene Unterbauten für Tischabzüge mit Seiteninstallation	716	
Höhe Sockel [mm]	110	

Tragkraft	
Ausziehbarer Fachboden [kg]	20

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Anschluss an permanent wirkendes Entlüftungssystem 4 Nivellierfüße Beschichtete Beschläge 2 Fachböden, ausziehbar, mit Auffangwannen Flügeltür(en) Kombinationsmöglichkeiten siehe Varianten
Griff	Griffleiste SCALA Bügelgriff Edelstahl


Lufttechnische Daten	
Volumenstrom [m³/h]	30
Lüftungsanschluss an Steigkanal Ø [mm]	90

FWF 90-Sicherheitsunterbau für Abzüge zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten



Verwendungszweck

- Eingeschobener Unterbau für Tischabzüge zur Aufbewahrung begrenzter Mengen von brennbaren Flüssigkeiten
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

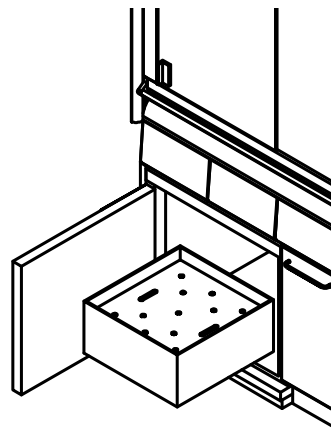

Varianten

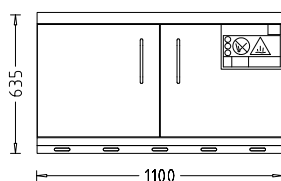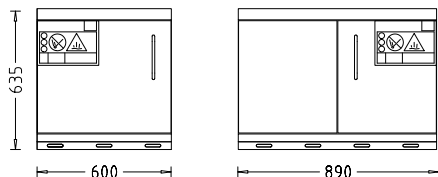

XPRESS

FWF 90-Sicherheitsunterbau für Abzüge zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten

Technische Daten

Abmessungen			
Breite [mm]	600	890	1100
Tiefe [mm]	600		
Gesamthöhe [mm]	635		
Höhe Sockel [mm]	35		
Gewicht max. [kg]	130	170	220

Tragkraft	
Fester Fachboden [kg]	30
Schubkasten [kg]	25

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Anschluss an permanent wirkendes Entlüftungssystem Anschluss an Erdungsleitung mit Potenzialausgleich Mit Schließung Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Selbsttätiges Schließen durch stromunabhängige Thermoauslösung im Brandfall Flügeltür Schubkasten
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Griff	Edelstahl-Bügelgriff
Zusätzlicher Wannenauszug	Optional bei Schubkasten
Vorschriften und Normen	EN 14470-1 TRGS 510

Lufttechnische Daten	
Volumenstrom [m³/h]	30
Lüftungsanschluss an Steigkanal Ø [mm]	90


Material	
Unterbau	Außen pulverbeschichtetes Stahlblech, Farbe: Reinweiß RAL 9010
Lüftungsanschluss	PPS

FWF 90-Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten


Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung begrenzter Mengen von brennbaren Flüssigkeiten
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

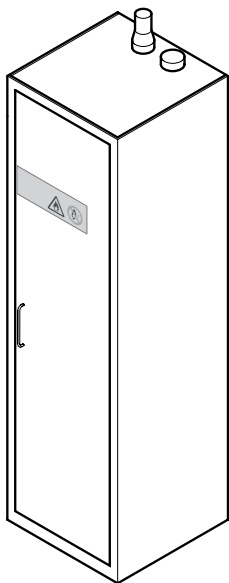

Varianten

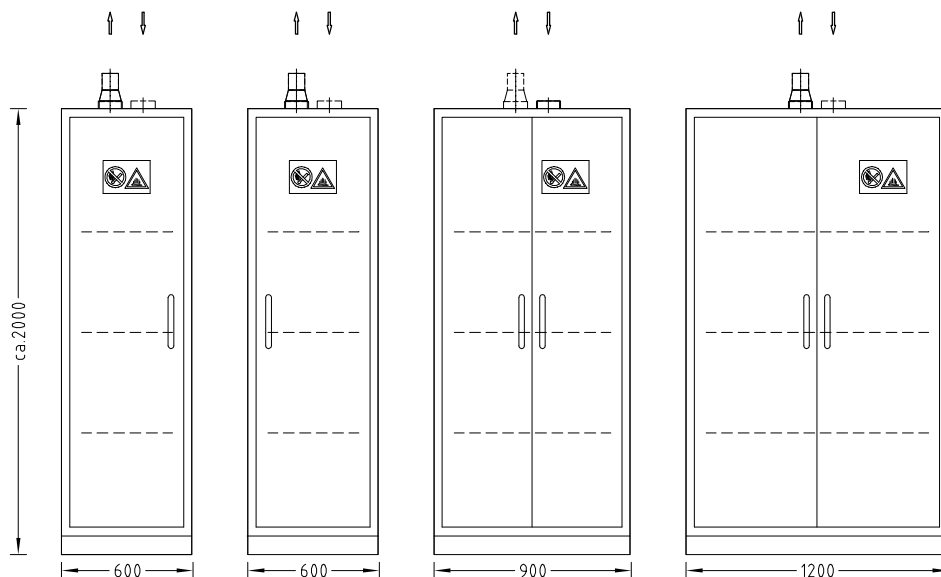

XPRESS

FWF 90-Sicherheitsschrank zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten

Technische Daten

Abmessungen			
Breite [mm]	600	900	1200
Tiefe [mm]	Ca. 600		
Gesamthöhe [mm]	Ca. 2000		
Höhe Sockel [mm]	Ca. 80		
Gewicht max. [kg]	290	360	470

Tragkraft	
Wannenboden [kg]	Abhängig von Ausführung

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Anschluss an permanent wirkendes Entlüftungssystem Anschluss an Erdungsleitung mit Potenzialausgleich Im Brandfall selbstständiges Schließen durch stromunabhängige Thermoauslösung 3 Wannenböden, höhenverstellbar Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Mit Schließung 4 Nivellierfüße Flügeltür(en)
Kombinationsmöglichkeiten	Siehe Varianten
Weitere Ausführungen und Ausstattungen	Auf Anfrage
Vorschriften und Normen	EN 14470-1 TRGS 510

Lufttechnische Daten	
Volumenstrom [m³/h]	30
Lüftungsanschluss Ø [mm]	75

Material	
Laborschrank	Außen pulverbeschichtetes Stahlblech, Reinweiß RAL 9010
Lüftungsanschluss	Stahl, verzinkt


XPRESS

G 90-Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen


Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Druckgasflaschen in Gebäuden
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht geeignet zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Aufbau

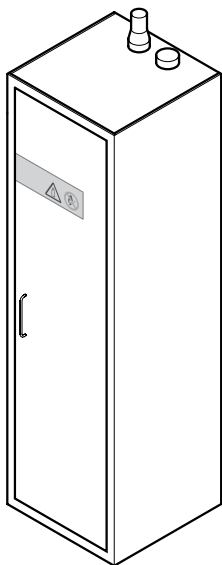

Varianten

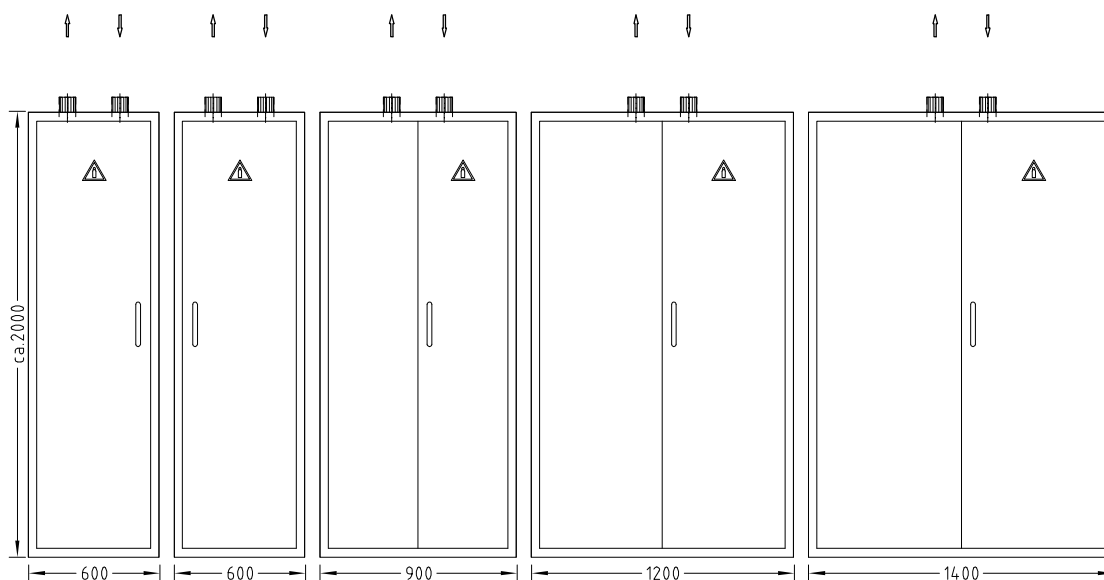

XPRESS

G 90-Sicherheitsschrank für Druckgasflaschen

Technische Daten

Abmessungen	600	900	1200	1400
Breite [mm]	600	900	1200	1400
Tiefe [mm]	Ca. 600			
Gesamthöhe [mm]	Ca. 2000			
Eigengewicht max. [kg]	390	530	660	740

Ausführungsmerkmale	600	900	1200	1400
Konstruktion	Anschluss an permanent wirkendes Entlüftungssystem Montageschiene zur Aufnahme von Druckgasminderstationen Einrollrampe für Druckgasflaschen Mit Schließung 4 Nivellierfüße Durchführungen für Rohrleitungen und Kabel in Schrankdecke Flügeltür(en)			
Max. Anzahl Druckgasflaschen 50 l bei Schrankbreite	1	3	4	4
Weitere Ausführungen und Ausstattungen	Auf Anfrage			
Vorschriften und Normen	EN 14470-2			




Lufttechnische Daten	600	900	1200	1400
Volumenstrom [m³/h] bei Schrankbreite	60	90	120	140
Lüftungsanschluss Ø [mm]	75			

Material	
Laborschrank	Außen pulverbeschichtetes Stahlblech, Farbe: Reinweiß RAL 9010
Lüftungsanschluss	Stahl, verzinkt

Sanitärinstallation

Medium	Abkürzung	System (Material)	Dimension der Leitung	Ausführung der Stichleitung
Technische Gase < 2.0 (nicht brennbar)				
Druckluft	CA	Cu - PressW	15 x 2.5 mm 22 x 3,0 mm	Uniflex-V (SPX)
Vacuum grob (1 - 1000 mbar _{abs})	V	PTFE/PVDF	10 x 1.25 mm	Uniflex-V (SPX)
Stickstoff (bis 2.0)	N ₂	Cu - PressW	15 x 1.0 mm	Uniflex-V (SPX)
Argon (bis 2.0)	Ar	Cu - PressW	15 x 1.0 mm	Uniflex-V (SPX)
Kohlendioxid (bis 2.0)	CO ₂	Cu - PressW	15 x 1.0 mm	Uniflex-V (SPX)
Helium (bis 2.0)	He	Cu - PressG	15 x 1.0 mm	Uniflex-Y (VA-Wellschlauch)
Technische Gase < 2.0 (brennbar) + Allgase (G260)				
Erdgas (< 0.1 bar)	G	Cu - PressG	15 x 1.0 mm 22 x 1.0 mm	Uniflex-Y (VA-Wellschlauch)
Flüssiggas (< 0.1 bar)	LPG	Cu - PressG	15 x 1.0 mm 22 x 1.0 mm	Uniflex-Y (VA-Wellschlauch)
Reinstgase				
Stickstoff (bis 5.5)	N ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Argon (bis 5.5)	Ar	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Helium (bis 5.5)	He	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Sauerstoff (bis 5.5)	O ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Kohlendioxid (bis 5.5)	CO ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Wasserstoff (bis 5.5)	H ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Carbogen (bis 5.5)	O ₂ /CO ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Synthetische Luft (bis 5.5)	SA	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Kohlenmonoxid (bis 5.5)	CO	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Formiergas (bis 5.5)	H ₂ /N ₂	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Lachgas (bis 5.5)	N ₂ O	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Acetylen (bis 4.0)	C ₂ H ₂	VA - fettfrei	6 x 1.0 mm 10 x 1.0 mm	6 x 1.0 VA
Wahlgas (bis 5.5)	W1	Cu - fettfrei	10 x 1.0 mm	6 x 1.0 Cu - fettfrei
Wässer				
Wasser kalt	WPC / WNC	Cu - PressW VA - PressW (optional)	15 x 1.0 mm 22 x 1.0 mm	Uniflex-V (SPX)
Wasser warm	WPH / WNH	Cu - PressW VA - PressW (optional)	15 x 1.0 mm (isol.) 22 x 1.0 mm (isol.)	Uniflex-V (SPX)
Wasser entsalzt	WDC	VA - PressW PP (optional)	15 x 1.0 mm 22 x 1.0 mm	PAw 10 x 1mm / PTFE 10 x 1mm
Kühlwasser Vorlauf/Rücklauf (geschlossen)	WCF / WCR	Cu - PressW	15 x 1.0 mm (isol.) 22 x 1.0 mm (isol.)	Uniflex-V (SPX) isol.
Weitere Medien				
Abluft		HT Rohr (PP)	50 mm	PVC
Abwasser	Ab	PE-HD (DN56)	56 x 3.0 mm	PP / PE-HD

Elektroinstallation

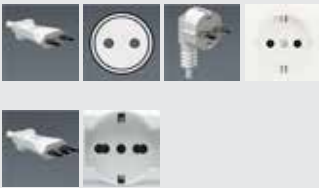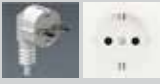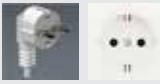Land	Frequenz / Spannung	IP-Schutz	Steckdosen- Typ		Einschränkung
Mexiko, Venezuela & Japan	60Hz / 127/220V	IP20/44	Typ B (NEMA 5-15R) 127 V		Absicherung bauseits
USA	60Hz / 120/208V	IP20/44	Typ B (NEMA 5-15R) 120 V		Verdrahtung und Absicherung bauseits
Italien	50Hz / 230/400V	IP55	Typ C + Typ F + Typ L		Absicherung bauseits
Spanien	50Hz / 230/400V	IP20/44	Typ F (Schuko)		Nur 2-polige Absicherung verfügbar, AC/DC sensitive Absicherungen nicht verfügbar
Niederlande	50Hz / 230/400V	IP20/44	Typ F (Schuko)		Nur 1+N- Absicherung verfügbar, Verkabelung nicht in Einzel- adern möglich, AC/DC sensitive Absicherungen nicht verfügbar
England	50Hz / 230V	IP20	Typ G		Nur einphasige Steckdosen verfügbar
Frankreich & Belgien	50Hz / 230/400V	IP20/44	Typ E		
Schweiz	50Hz / 230/400V	IP20/55	Typ J		
Deutschland	50Hz / 230/400V	IP20/44	Typ F (Schuko)		

! Info: Bitte beachten Sie die länderspezifischen Einschränkungen
bezüglich Verdrahtung und Absicherung!

Verdrahtung ist verfügbar als Standard oder Halogenfrei!

Abtropfbord



Verwendungszweck

- Gestell zum Trocknen von Laborgläsern
- Zur Befestigung über Spülen an Zellenständer oder zur Wandmontage

Technische Daten

Abmessungen	
Abtropfbord Breite x Höhe [mm]	600 x 360
18 Abtropfstifte	
Abtropfstift [mm]	Ø 12

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Blende mit Abtropfboard und abnehmbarem Abtropfbecken

Bestellinformation


Ausführung	VE	Best.-Nr.
Abtropfbord, 18 Abtropfstifte, Durchmesser 12mm	1 Set	81005862-22

Lieferumfang

- 1 Trägerplatte
- 2 Abtropfbord mit 18 Abtropfstiften, Durchmesser 12mm
- 2 Auffangrinnen

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Abtropfstift Ø 12	1	81006177
Abtropfstift Ø 9	1	81011766

Abtropfbord für Medienkanal

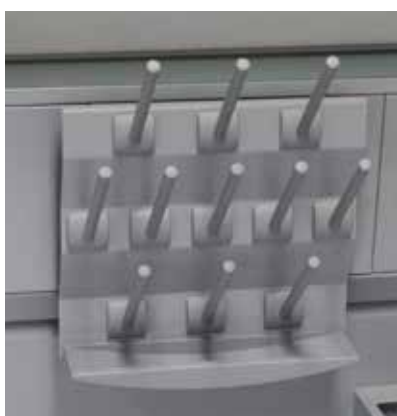

Verwendungszweck

- Gestell zum Trocknen von Laborgläsern

Technische Daten

Abmessungen	
Abtropfbord Breite x Höhe [mm]	300 x 260
Abtropfstift [mm]	Ø 12 Ø 9

Bestellinformation

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Abtropfbord für Medienkanal, 11 Abtropfstifte, Durchmesser 12mm	1 Set	81005861-2

Lieferumfang

- 1 Abtropfbord mit 11 Abtropfstiften, Durchmesser 12mm
- 1 Ablaufrinne
- 1 Befestigung

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Abtropfstift Ø 12	1	81006177
Abtropfstift Ø 9	1	81011766

Systemanlegeleiter



Verwendungszweck

- Zum Einhängen in Aufsatzschränke

Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm]	405
Höhe [mm]	2330

Tragkraft	
Belastbarkeit [kg]	150

Bestellinformation

Material	VE	Best.-Nr.
Aluminium	1	81006175

Stufenstehleiter



Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Länge [mm]	422 x 70 x 2330

Tragkraft	
Belastbarkeit [kg]	150

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Mit 4 Stufen

Bestellinformation

Material	VE	Best.-Nr.
Aluminium	1	81006174

Handtuchspender Kunststoff



Verwendungszweck

- Als Kombihandtuchspender für Papierrollen (Breite 240mm, DU 155mm) oder Papierhandtücher mit C- oder Z-Faltung im Format 250x230mm, passend von Tork, Satino, Quicky, Van Houtum

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	195 x 251 x 300

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Kunststoff	81006405

Lieferumfang

1 Handtuchspender mit Schlüssel ohne Papierfüllung

Handtuchspender Aluminium



Verwendungszweck

- Für Papierhandtücher mit C- oder Z-Faltung im Format 250x230 mm, passend von Tork, Satino, Quicky, Van Houtum

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	130 x 185 x 275

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Aluminium	81006406

Lieferumfang

1 Handtuchspender mit Schlüssel ohne Papierfüllung

Seifenspender



Verwendungszweck

- Für Flüssigseifen, mit frei nachfüllbarem 1100ml Behälter ohne Kartuschen, geeignet für Flüssigseife von Clivia

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	130 x 115 x 220

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Kunststoff	81006407

Lieferumfang

1 Seifenspender abschließbar ohne Seifenfüllung

Kleinteileboxen



Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen

Technische Daten

Die Farbe der Kleinteileboxen kann technischen Änderungen unterliegen.

Abmessungen	
Kleinteileboxen mit Einhängeschiene Breite x Tiefe x Höhe [mm]	516 x 203 x 80
Kleinboxen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	100 x 160 x 75

Tragkraft	
Belastbarkeit [kg]	5

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Kunststoff/Aluminium	81005871-2

Lieferumfang

2 Klemmadapter für Medienkanal
1 Einhängeschiene mit Bügel
5 Kleinteileboxen

Papierrollenhalter



Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von Papierrollen

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	270 x 146 x 88

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Stahl	81005867-2

Lieferumfang

2 Klemmadapter für Medienkanal
1 Papierrollenhalter

Monitorhalter



Verwendungszweck

- Für Flachbildschirme mit VGSA-Aufnahme 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
- Für Medienzelle mit Medienkanal und Frontblende

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	280 x 390 x 283
Tragkraft	
Belastbarkeit [kg]	10
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Vertikal schwenkbar (45°) Horizontal dreh- und verschiebbar

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Stahl	81010387-2

Lieferumfang

- 2 Klemmadapter für Medienkanal
- 1 Monitorkonsole

Beschriftungsschild



Verwendungszweck

- Zur Beschriftung von Türen und Schubkästen

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	78 x 3 x 18
Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	3-teilig, selbstklebend, mit herausnehmbaren Papierstreifen zum Beschriften

Bestellinformation

Material	VE	Best.-Nr.
Kunststoff transparent	1	81008260

Pipettenhalter mit Einsteckbohrungen



Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von 11 Pipetten

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	297 x 175 x 66
Einsteckbohrung [mm]	5 x Ø 26 6 x Ø 20

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Stahl/Kunststoff (PE)	81005866-2

Lieferumfang

- 2 Klemmadapter für Medienkanal
- 1 Anschraubrahmen für Pipettenhalter
- 1 Aufnahmeplatte für Pipetten

Pipettenhalter mit Einhängeschiene



Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von Pipetten mit Griffabhänghaken

Technische Daten

Abmessungen	
Breite x Tiefe x Höhe [mm]	300 x 41 x 80
Einhängeschiene [mm]	Ø 21

Bestellinformation

Material	Best.-Nr.
Stahl/Kunststoff	81010132-2

Lieferumfang

- 2 Klemmadapter für Medienkanal
- 1 Anschraubrahmen für Pipettenhalter
- 1 Eihängeschiene für Pipetten

Stativhalter für Abzüge



Verwendungszweck

- Zur Montage von Stativstäben im Abzugsinnenraum
- Für Stativstäbe $\varnothing$ 13 mm

Technische Daten

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	3-teilige Halterung

Tragkraft	
Belastbarkeit [kg]	5

Material	
Haltemutter	PBT
Stativhalter	PBT

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Stativhalter	1	81005039
Spannmutter	1	81005252
Haltemutter	1	81005040

Stativstab



Verwendungszweck

- Zur Montage an Stativhalter im Abzug oder an Medienzelle

Technische Daten

Abmessungen	
Länge [mm]	120, 300, 600, 900, 1100, 1200, 1400, 1500, 1700, 2000
Durchmesser [mm]	13

Material	
Stativstab	Chromnickelstahl

Bestellinformation

Länge [mm] (Verwendung)	VE	Best.-Nr.
120	1	81006152
300	1	81006153
600	1	81006154
900	1	81006155
1100 (für horizontale Nutzung im Abzug)	1	81011630
1200	1	81006156
1400 (für horizontale Nutzung im Abzug)	1	81011631
1500	1	81006157
1700 (für horizontale Nutzung im Abzug)	1	81011632
2000 (für horizontale Nutzung im Abzug)	1	81011633

Soforthilfeschrank



Verwendungszweck

- Zur Aufbewahrung von Schutz- und Rettungsmaterialien (Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer usw.)
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten, Druckgasflaschen und selbstentzündlichen oder selbstzerfallenden Stoffen
- Nicht zugelassen zur Aufbewahrung von Säuren und Laugen

Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	350 550
Gesamthöhe [mm]	2090
Höhe Sockel [mm]	110

Ausführungsmerkmale	
Konstruktion	Flügeltür mit 270°-Scharnieren 4 Fachböden, höhenverstellbar 4 Nivellierfüße
Ausstattung	Erste-Hilfe-Koffer Feuerlöscher, 5 kg Sandkisten Sandschaufel Löschdecken
Griff	Bügelgriff Edelstahl (Standardausführung) Bügelgriff SCALA (optional)

Bestellinformation

Ausführung	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
1 Flügeltür links 	600 x 350 x 2090	1 Set	81002910-3B40022
	600 x 550 x 2090	1 Set	81002910-5B40022
1 Flügeltür rechts 	600 x 350 x 2090	1 Set	81002911-3B40022
	600 x 550 x 2090	1 Set	81002911-5B40022

Lieferumfang

- 1 Laborschrank mit Flügeltür
- 4 Fachböden
- 1 Erste-Hilfe-Koffer
- 1 Feuerlöscher
- 2 Sandkisten
- 1 Sandschaufel
- 2 Löschdecken

Wangen



Verwendungszweck

- Zum Einhängen in Zellenständer
- Für Ablagen aus Glas und OSB-Platten und für Stativhalter

Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm]	171
Tiefe [mm]	3
Höhe [mm]	382

Bestellinformation

Material	VE	Best.-Nr.
Stahl	1 Set	81002720-322

Lieferumfang
2 Wangen

Rack



Verwendungszweck

- Fahrbare, flexible Ablagefläche
- Mit dem 600 mm tiefen Fachboden als fahrbarer Schreivarbeitsplatz einsetzbar
- Nicht geeignet für Laborarbeiten, bei denen gefährliche Stoffe abgesaugt werden müssen
- Nicht geeignet zur Lagerung gefährlicher Stoffe

Technische Daten

Abmessungen	
Breite [mm] mit Fachboden	900
Tiefe [mm] mit Fachboden Tiefe 450 mm	600
Höhe [mm]	1790
Tiefe Fachboden [mm]	450 600

Material	
Tragkonstruktion	Stahlprofil
Fachboden 22 mm	Ablage aus beschichteter OSB-Platte

Tragkraft	
Gesamt [kg]	150
Fachboden [kg]	20

Ausführungsmerkmale	
Schwerlastrollen	4, davon 2 arretierbar (Rolle und Lenkachse arretierbar)
Fachboden	Werkzeuglos verstellbar im Raster von 150 mm
Integrierter Kabelschrank	Optional

Bestellinformation

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Rack	1 Set	81005369-31022

Lieferumfang

1 Tragkonstruktion
1 Fachboden Tiefe 600 mm
3 Fachböden Tiefe 450 mm

Schubkasteneinsatzschalenset



Verwendungszweck

- Zur Komplettbestückung von Schubkästen
- Für Unterbauten mit einer Tiefe von 550 mm

Technische Daten

Ausführungsmerkmale							
Schubkastenbreite [mm]	450	545	600	845	900	1145	1200
Schalenausprägung	1x Einzelelement mit einer Mulde 140mm breit 1x Einzelelement mit einer Mulde 90mm breit 1x Doppelelement mit zwei Mulden je 80mm breit						
Farbe	Weiß, transluzent						
Oberfläche	Genarbt						

Material	
Einsatzschale	PP-Kunststoff
Profilschiene	Aluminium natur

Bestellinformation

Für Schubkastenbreite 450 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
2 Stück	350 x 480 x 48	1	81012701

Für Schubkastenbreite 545 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
3 Stück	445 x 480 x 48	1	81012702

Für Schubkastenbreite 600 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
4 Stück	500 x 480 x 48	1	81012703
3 Stück	500 x 480 x 48	1	81012704

Für Schubkastenbreite 845 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
5 Stück	745 x 480 x 48	1	81012705

Für Schubkastenbreite 900 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
5 Stück	800 x 480 x 48	1	81012706
7 Stück	800 x 480 x 48	1	81012707
6 Stück	800 x 480 x 48	1	81012708

Für Schubkastenbreite 1145 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
7 Stück	1045 x 480 x 48	1	81012709
8 Stück	1045 x 480 x 48	1	81012710

Für Schubkastenbreite 1200 mm



Einsatzschalen je Set	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
7 Stück	1100 x 480 x 48	1	81012711
8 Stück	1100 x 480 x 48	1	81012712
10 Stück	1100 x 480 x 48	1	81012713

Lieferumfang je Set
1 Schalenset mit Profilstäben
2 Dichtlippen

Trennsteg für
Schubkasteneinsatzschalenset



Schalenelement	VE	Best.-Nr.
80 mm	1	81012700
90 mm	1	81012698
140 mm	1	81012699

Schalenset



Verwendungszweck

- Zur Komplett- oder Teilbestückung von Schubkästen
- Variable Einteilung von Schubkästen
- Für Schubkästen mit einer Tiefe von 450 mm und 500 mm

Technische Daten

Ausführungsmerkmale	
Bestückung	Noppenmatte mit Klebepads fixierbar Einsatzschalen einzeln herausnehmbar
Farbe	Lichtgrau

Material	
Einsatzschale, Noppenmatte	ABS-Kunststoff

Bestellinformation

Die Abmessung der Noppenmatte entspricht dem Außenmaß des Schalense. Noppenmatte und Klebepunkte sind jeweils im Lieferumfang enthalten.

Für Schubkastentiefe 450 mm



Schalenset für Schubkasten- breite 450 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
336 x 432 x 48	2 St. à 96 x 288 x 48 3 St. à 96 x 144 x 48 3 St. à 96 x 96 x 48	1Set	81008343



Schalenset für Schubkasten- breite 545 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
432 x 432 x 48	3 St. à 96 x 240 x 48 3 St. à 96 x 192 x 48 3 St. à 144 x 144 x 48	1Set	81008344



Schalenset für Schubkasten- breite 600 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
480 x 432 x 48	5 St. à 96 x 240 x 48 5 St. à 96 x 144 x 48	1Set	81008345



Schalenset für Schubkasten- breite 845 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
720 x 432 x 48	3 St. à 240 x 336 x 48 3 St. à 96 x 240 x 48	1Set	81008346



Schalenset für Schubkasten- breite 900 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
792 x 432 x 48	8 St. à 96 x 144 x 48 6 St. à 96 x 288 x 48 3 St. à 96 x 192 x 48	1Set	81008347

Für Schubkastentiefe 450 mm



Schalenset für Schubkastenbreite 1145 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
960 x 432 x 48	1 St. à 240 x 336 x 48 9 St. à 144 x 192 x 48 3 St. à 144 x 144 x 48 1 St. à 96 x 240 x 48	1Set	81008348



Schalenset für Schubkastenbreite 1200 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
1080 x 432 x 48	6 St. à 144 x 384 x 48 3 St. à 96 x 288 x 48 3 St. à 96 x 144 x 48	1Set	81008349

Lieferumfang

- 1 Schalenset
- 1 Noppenmatte (Abmessung entspricht Schalenset)
- 4 Klebepunkte

Für Schubkastentiefe 500 mm



Schalenset für Schubkastenbreite 450 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
336 x 480 x 48	1 St. à 144 x 192 x 48 3 St. à 96 x 192 x 48 3 St. à 96 x 144 x 48 4 St. à 96 x 96 x 48	1Set	81008350



Schalenset für Schubkastenbreite 545 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
432 x 480 x 48	1 St. à 96 x 336 x 48 2 St. à 96 x 288 x 48 6 St. à 96 x 144 x 48 4 St. à 96 x 96 x 48	1Set	81008351



Schalenset für Schubkastenbreite 600 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
480 x 480 x 48	2 St. à 96 x 288 x 48 2 St. à 96 x 240 x 48 4 St. à 96 x 192 x 48 4 St. à 96 x 144 x 48	1Set	81008352



Schalenset für Schubkastenbreite 600 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
480 x 480 x 24/48	1 St. à 240 x 336 x 48 2 St. à 144 x 192 x 48 1 St. à 144 x 144 x 48 1 St. à 144 x 192 x 24 (Schale mit 8 Facheinteilungen) 1 St. à 96 x 192 x 24 (Schale mit 3 Facheinteilungen) 2 St. à 96 x 144 x 48	1Set	81006027



Schalenset für Schubkastenbreite 845 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
720 x 480 x 48	5 St. à 96 x 336 x 48 5 St. à 96 x 240 x 48 5 St. à 96 x 96 x 48	1Set	81008353

XPRESS Laborzubehör

Für Schubkastentiefe 500 mm



Schalenset für Schubkasten- breite 900 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
792 x 480 x 48	2 St. à 144 x 384 x 48 4 St. à 144 x 192 x 48 4 St. à 144 x 144 x 48 2 St. à 96 x 192 x 48 1 St. à 96 x 288 x 48	1Set	81008354

Schalenset für Schubkasten- breite 1145 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
960 x 480 x 48	1 St. à 240 x 336 x 48 1 St. à 144 x 384 x 48 5 St. à 144 x 144 x 48 8 St. à 144 x 192 x 48	1Set	81008355

Schalenset für Schubkasten- breite 1200 mm Breite x Tiefe x Höhe [mm]	Schalen Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
1080 x 480 x 48	2 St. à 240 x 336 x 48 2 St. à 144 x 384 x 48 2 St. à 144 x 192 x 48 3 St. à 96 x 336 x 48 2 St. à 96 x 240 x 48 2 St. à 96 x 192 x 48	1Set	81008356


Lieferumfang

- 1 Schalenset
- 1 Noppenmatte (Abmessung entspricht Schalenset)
- 4 Klebepunkte

Ergänzung Schalenset

Ausführungsmerkmale	Schale Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
	96 x 192 x 24 (3 Facheinteilungen)	1	81007191
	144 x 192 x 24 (8 Facheinteilungen)	1	81007192
	96 x 96 x 48	1	80009302
	96 x 144 x 48	1	80009303
	96 x 192 x 48	1	81005193
	96 x 240 x 48	1	81007185
	96 x 288 x 48	1	80009304
	96 x 336 x 48	1	81007186
	144 x 144 x 48	1	81007187
	144 x 192 x 48	1	81007188
	144 x 384 x 48	1	81007189

Ergänzung Schalenset

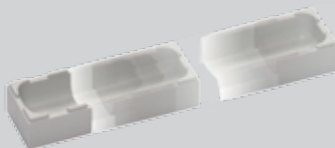Ausführungsmerkmale	Schale Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
	240 x 336 x 48	1	81007190
	73 x 48 x 24 Tiefe stufenlos einstellbar	1	81007194

Lieferumfang

5 Schalen (Bei Schale mit einstellbarer Tiefe: 4 Schalen)

Noppenmatte

Ausführungsmerkmale	Breite x Tiefe x Höhe [mm]	VE	Best.-Nr.
	480 x 480 x 3 (zuschneidbar alle 24 mm)	1	81005195

Lieferumfang

5 Noppenmatten

Exzenterhaltestifte

Ausführungsmerkmale	Abmessungen [mm]	VE	Best.-Nr.
	Höhe 30, Durch- messer 24	10	81007193

Lieferumfang10 Exzenterhaltestifte
20 Schrauben

Montageset

Ausführungsmerkmale	VE	Best.-Nr.
	1	81010042

Lieferumfang4 Klebepunkte
2 Schneidehilfen
1 Universalmesser
1 Montageanleitung

Stuhl Bimos Modell Flex 2 9409



Eigenschaften

- Sitz-Höhenverstellung von 510-780 mm
- Drehbar um 360°
- Körpergerechte und komfortable Rückenstütze
- Besonders guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche
- PU-Schaum schwarz, weich, abwaschbar, unempfindlich und desinfektionsmittelbeständig
- Kippsicheres Fußkreuz aus Kunststoff, mit Gleiter

Bestellinformation

Bezeichnung	Best.-Nr.
Stuhl Bimos Modell Flex 2 9409	80013951

Spülautomaten

Bezeichnung	Modell	Material	Abmessungen B x H x T [mm]	Best.-Nr.
Spülautomat	PG 8583	VA-Verkleidung	600 x 600 x 820	81014242
Spülautomat	PG 8583 CD CM	VA-Verkleidung	900 x 600 x 820	81014775
Purifikator	PG 8595 D AE	Edelstahl	300 x 600 x 820 ohne Patrone	81014243

! Spülmaschinen nur in Deutschland/Österreich möglich!



7 Allgemeines

Unsere innovativen Entwicklungen haben uns im Laborbereich zum Marktführer gemacht.

Unsere Produkte gelten weltweit als Maßstab und haben den Arbeitsplatz Labor maßgeblich geprägt.

Weil wir die Erwartungen unserer Kunden kennen, entwickeln wir uns stetig weiter.

Technische Änderungen behalten wir uns im Sinne der Weiterentwicklung vor. Bilder, Zeichnungen und textliche Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der WALDNER Laboreinrichtungen SE & Co. KG.



XPRESS Auszeichnungen

Seit mehr als 70 Jahren entwickeln wir Laboreinrichtungen weiter. Über diesen langen Zeitraum haben wir bis heute mit unseren Innovationen den Arbeitsplatz Labor maßgeblich beeinflusst.

Durch unsere, in der Branche nicht alltägliche, Entwicklungs- und Fertigungstiefe verfügen wir über einen ansehnlichen Erfahrungsschatz in Entwicklung, Fertigung, Projektierung, Montage und Service.

Zahlreiche Patente, Marken, Geschmacks- und Gebrauchsmuster belegen deutlich unsere Innovationskraft. Als Marktführer werden wir auch weiterhin alles dafür tun, unsere Kunden mit neuen, innovativen Ideen zu begeistern.



Qualität bis ins Detail definiert sich nicht nur über unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem, was wir tun.

Als erstem deutschem Hersteller von Laboreinrichtungen wurde uns die Qualitätsnorm ISO 9001 zuerkannt.

Ihnen als Kunden gibt die ISO 9001 die Gewähr, hochwertigste Produktqualität und professionelle Betreuung von der Planungsphase bis hin zum Service zu erhalten. Selbstverständlich eingeschlossen der Einkauf, die Entwicklung, die technischen Bereiche, die Produktion und die Montage. Hausinterne Qualitätsprüfungen und regelmäßige Schulungen sichern die genaue Einhaltung der hohen Kriterien der ISO 9001.

Die Produkte des Laboreinrichtungssystems **SCALA** sind von der TÜV Product Service GmbH auf Basis aller geltenden Normen und Vorschriften nach dem Gerätesicherheitsgesetz geprüft und tragen das GS-Zeichen.

Diese Prüfzeugnisse werden nur vergeben, wenn auch laufend Fertigungsüberwachungen vorgenommen werden. Wir haben uns dazu verpflichtet – in mehrfacher Hinsicht: Sämtliche bei uns eingesetzten Materialien, Komponenten und Einzelteile werden laufend geprüft, teilweise auch in externen Prüfinstituten.





Waldner Laboreinrichtungen sind umweltzertifiziert. Unser aktives Umweltmanagementsystem erfüllt die Richtlinien der EN ISO 14001. Alle Aspekte sind uns wichtig: Von den eingesetzten Materialien bis zur Energieeffizienz in der Produktion achten wir auf Umweltverträglichkeit. So beliefern uns beispielsweise ausschließlich Lieferanten aus der Region mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz, unsere Pulverlackierungen sind komplett lösemittelfrei, das Restholz aus der Produktion deckt 85% unseres Heizbedarfs, alle Mitarbeiter werden laufend zu umweltrelevanten Themen geschult und die Konformität zur EN ISO 14001 wird regelmäßig durch den TÜV Süd überprüft.



XPRESS

Installationsschnittpunkte Sanitär und Elektro

- Für Wasser und technische Gase sind bauseitig Absperrventile mit 1/2"-Innengewinde nach DIN EN 10226-2 vorzusehen
- Für Reinstgase sind bauseitig Absperrventile mit 10-mm-Klemmringverschraubungen vorzusehen
- Für Abwasser ist bauseitig eine Steckmuffe 56 mm vorzusehen
- Elektrozuleitung nach DIN VDE 0100-430
- Leitungsart mit bauseitiger Absicherung in Abstimmung mit Fa. Waldner
- Die Positionierung der Übergabepunkte für die bauseitigen Gewerke werden projektspezifisch in den Positionszeichnungen von Waldner angegeben

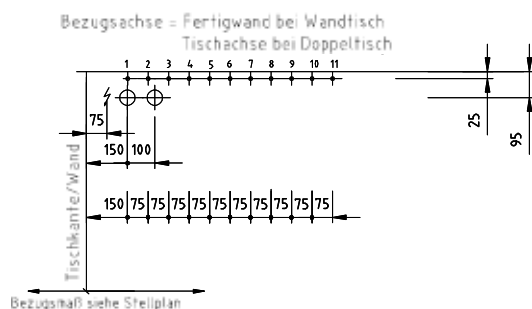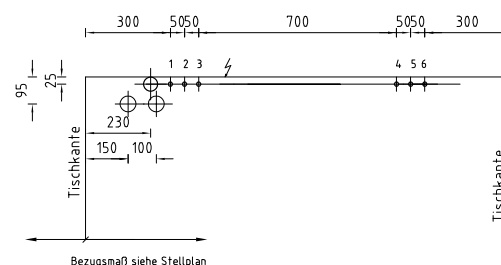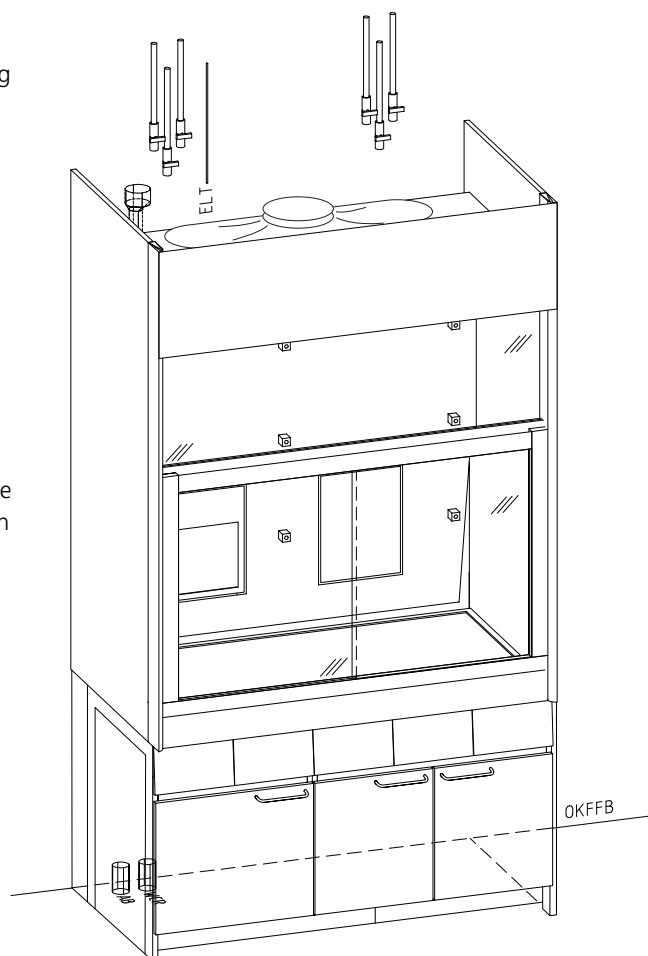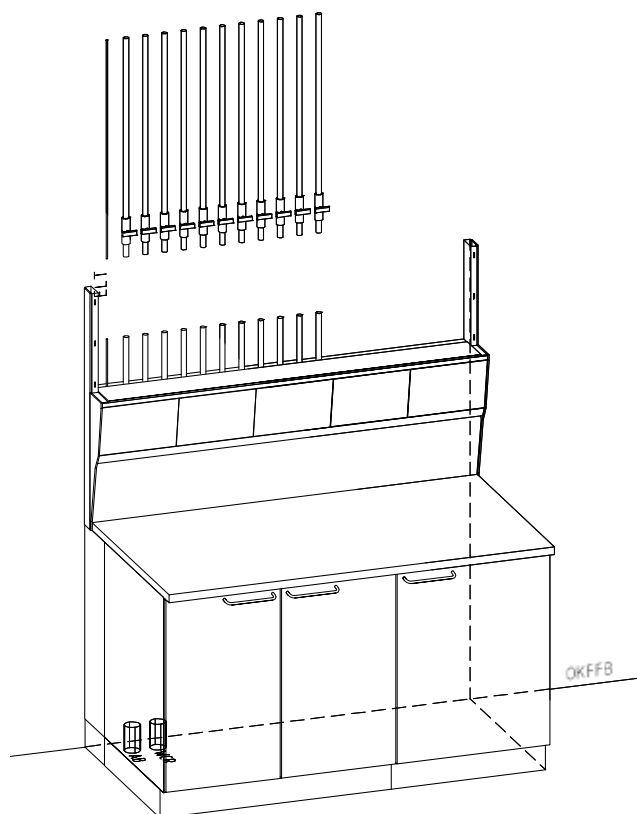

! Info: Bei Zeichnungen Schnittstellen bitte berücksichtigen!



Rahmenbedingungen

- ! Ausschließlich Artikel aus diesem Katalog sind für XPRESS zugelassen
- ! Projektgröße darf 250.000 € bzw. 500.000 € nicht überschreiten
- ! Final genehmigte Zeichnungen sind Auftragsbestandteil
- ! Lieferzeit je nach Projekttyp
- ! Metallteile in weiß (RAL 9010)

Bei Fragen oder Anregungen bitte an folgende E-Mail schreiben:
xpress@waldner.de